

Začněte zde

G7

Základní informace o systému G7

G7 zobrazuje informace o vaší hladině glukózy na vašich zobrazovacích zařízeních.


Co se nachází v balení senzoru

Senzor a aplikátor



- Během nastavení vám ukážeme, jak používat aplikátor k zavedení zabudovaného senzoru pod kůži.
- Senzor odesílá naměřenou hodnotu glukózy na vaše zobrazovací zařízení každých 5 minut.
- Senzor vydrží až 10 dní s dodatečnými 12 hodinami na výměnu senzoru.

Krycí náplast

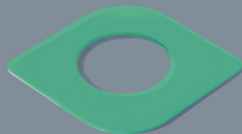

Po zavedení senzoru můžete použít krycí náplast jako pomůcku k udržení senzoru na kůži.

Pokyny

Během nastavení se řiďte pokyny k zavedení senzoru uváděnými v aplikaci nebo přiloženými v balení s krycí náplastí.

Základní informace o systému G7

G7 zobrazuje informace o vaší hladině glukózy na vašich zobrazovacích zařízeních.

Které zobrazovací zařízení nastavujete?

- **Aplikace**

Přejít na část: Nastavení aplikace

- **Přijímač**

Přejít na část: Nastavení přijímače

Použití až tří zobrazovacích zařízení

Informace o vaší glukóze můžete získávat ve svém telefonu, na chytrých hodinkách a v přijímači Dexcom.

Aplikaci telefonu přijímač nebo obojí můžete nastavit v libovolném pořadí.

Aplikace nebo přijímač nemusí být dostupné ve všech oblastech.

Seznam podporovaných chytrých telefonů a operačních systémů naleznete na stránkách: **dexcom.com/compatibility**

Prostudujte si indikace k použití v *Uživatelské příručce G7*.

Všechny obrázky mají ilustrační charakter. Váš výrobek může vypadat odlišně.

Nastavení aplikaci telefonu

1. Začínáme

Během nastavení je nutné mít bezpečný přístup k internetu.

- Otevřete App Store nebo Google Play Store, kde si stáhněte aplikaci Dexcom G7.




Dexcom G7

★★★★☆ 4.3 K

- Otevřete aplikaci telefonu.
- Přihlaste se nebo si vytvořte účet.

3. Zahřátí senzoru

Časovač zahřívání senzoru vás upozorní, až začnete dostávat naměřené hodnoty a výstrahy.

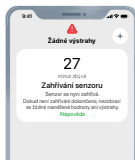

2. Nastavení

- Při nastavování aplikaci telefonu postupujte dle pokynů v aplikaci.
- Pokyny k zavedení senzoru uvádí aplikaci telefonu nebo si můžete prostudovat pokyny v části *Zavedení senzoru* přiložené v balení senzoru.
- Po zavedení a spárování postupujte dle místních doporučení ohledně likvidace aplikátoru a recyklace balení systému Dexcom.


4. Vaše relace senzoru

Další informace naleznete v *Uživatelské příručce systému G7*.

Nastavení přijímače

1. Zavedení senzoru

- Senzor musíte zavést ještě před párováním s přijímačem.
- Postup naleznete v pokynech Zavedení senzoru přiložených v balení senzoru.

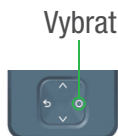

Vybrat

2. Nastavení přijímače

- Stisknutím tlačítka **Vybrat** na 3–5 sekund zapnete přijímač.
- Postup nastavení přijímače naleznete v pokynech k přijímači. Před párováním zaveďte senzor.
- Po zavedení a spárování postupujte dle místních doporučení ohledně likvidace aplikátoru a recyklace balení systému Dexcom.

3. Zahřátí senzoru

Časovač zahřívání senzoru vás upozorní, až začnete dostávat naměřené hodnoty a výstrahy.



4. Vaše relace senzoru

Další informace naleznete v *Uživatelské příručce systému G7*.

Navigace v přijímači

Obrazovka přijímače vám řekne, které tlačítko je třeba použít.

- Pokud chcete rychleji rolovat, podržte stisknuté tlačítko **Posunout**.
- Do dalšího pole se přesunete pomocí tlačítka **Vybrat**.

Posunout
nahoru
Vrátit
se zpět



Vybrat
Posunout dolů



© 2024 Dexcom, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Kryto patenty dexcom.com/patents.

Dexcom, Dexcom Clarity, Dexcom Follow, Dexcom One, Dexcom Share a veškerá související loga a designové značky jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Dexcom, Inc. ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a jiných zemích a oblastech. Google Play je ochranná známka společnosti Google LLC. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům a jiných zemích a oblastech.

dexcomG7



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
+1-858-200-0200
dexcom.com

Mimo USA: Kontaktujte
svého místního zástupce
společnosti Dexcom.

AW-00047-29 Rev 002 MT-00047-29
Rev Date 2024/06



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany