

Notkunarleiðbeiningar

Byrja hér

G7

Grunnatriði G7

G7 sýnir glúkósaupplýsingar á skjátækjunum þínum.


Innihald umbúða sykurnemans

Sykurnemi og skothylki



- Við uppsetningu sýnum við þér hvernig á að nota skothylki til að setja innbyggða nemann undir húðina.
- Sykurneminn sendir glúkósaaflestur til skjátækis/-tækja á 5 mínútna fresti.
- Skynjarinn endist í allt að 10 daga með 12 klst. frestun.

Yfirplástur

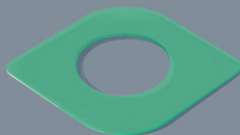

Eftir ísetningu sykurnemans er hægt að nota hlífðarplástur til að halda honum við húðina.

Leiðbeiningar

Meðan á uppsetningu stendur skaltu nota ísetningarleiðbeiningar fyrir sykurnema sem er að finna í appinu eða í pakkanum með hlífðarplástrinum.

Grunnatriði G7

G7 sýnir glúkósaupplýsingar á skjátækjunum þínum.

Hvaða skjátæki ertu að setja upp?

- **App**

Farðu í kaflann: Uppsetning apps

- **Móttakari**

Farðu í kaflann: Uppsetning móttakara

Notaðu allt að 3 skjátæki

Fáðu glúkósaupplýsingar í símann þinn, snjallúrið og Dexcom-móttakarann.

Þú getur sett upp símaappið, móttakarann eða bæði, í hvorri röð sem er.

Það má vera að appið eða móttakari fáiast ekki á öllum svæðum.

Sjá upplýsingar um studda snjallsíma og stýrikerfi á:

dexcom.com/compatibility

Kynntu þér ábendingar um notkun í *Notkunarleiðbeiningum G7*.

Myndir eru eingöngu til tilvísunar. Það kann að vera að varan þín líti ekki eins út.

Uppsetning símaapps

1. Hafist handa

Nauðsynlegt er að vera með trausta nettengingu meðan á uppsetningu stendur.

- Farðu í App Store eða Google Play Store til að sækja Dexcom G7 appið.




Dexcom G7

★★★★☆ 4.3 K

- Opnaðu símaappið.
- Skráðu þig inn eða stofnaðu reikning.

3. Upphitun sykurnema

Tímataljari fyrir upphitun sykurnema lætur þig vita þegar þú byrjar að fá álestur og viðvaranir.

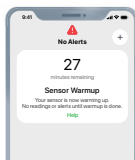

2. Uppsetning

- Fylgdu leiðbeiningunum í símaappinu til að setja það upp.
- Til að fá leiðbeiningar um ísetningu sykurnemans skaltu fylgja leiðbeiningunum í símaappinu eða kynna þér leiðbeiningarnar *Uppsetning sykurnema* í umbúðum sykurnemans.
- Eftir ísetningu og pörun skaltu fylgja reglum sem gilda á þínum stað um förgun skothylkis og endurvinnslu Dexcom-umbúðanna.

4. Sykurnemalotan þín

Farðu í *notkunarleiðbeiningar G7* til að fá nánari upplýsingar.

Uppsetning móttakara

1. Neminn settur í

- Þú verður að setja nemann í áður en hann er paraður við móttakarann.
- Leiðbeiningarnar má finna í *Uppsetning sykursnema* í umbúðum sykursnemans.



2. Uppsetning móttakara

- Ýttu á hnappinn **Velja** og haltu honum inni í 3-5 sekúndur til að kveikja á móttakaranum.
- Fylgdu leiðbeiningum móttakarans til að setja upp móttakara. Settu sykursnemann í fyrir þörun.
- Eftir ísetningu og þörun skaltu fylgja reglum sem gilda á þínum stað um förgun skothylkis og endurvinnslu Dexcom-umbúðanna

3. Upphitun sykursnema

Tímateljari fyrir upphitun sykursnema lætur þig vita þegar þú byrjar að fá álestur og viðvaranir.



4. Sykursnemalotan þín


Farðu í *notkunarleiðbeiningar G7* til að fá nánari upplýsingar.

Leiðsögn um móttakara

Skjár móttakarans sýnir þér hvaða hnapp þú átt að nota.

- Haltu inni hnappinum **Fletta** til að fletta hraðar
- Notaðu hnappinn **Velja** til að fara í næstareit

Fletta upp
Fara til baka

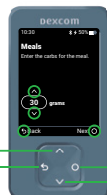

Velja
Fletta niður



© 2024 Dexcom, Inc. Allur réttur áskilinn.

Fellur undir einkaleyfi á dexcom.com/patents.

Dexcom, Dexcom Clarity, Dexcom Follow, Dexcom One, Dexcom Share og önnur tengd lógó og hönnunarmerki eru skráð vörumerki eða vörumerki Dexcom, Inc í Bandaríkjunum og/eða öðrum löndum. App store er vörumerki Apple Inc., skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum og svæðum. Google Play er vörumerki Google LLC. Öll önnur merki eru eign viðkomandi eigenda.

dexcomG7



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
+1-858-200-0200
dexcom.com

Utan Bandaríkjanna: Hafðu samband
við fulltrúa Dexcom á þínum stað



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany