

Rozpocznij tutaj


G7

G7 – Informacje podstawowe

Urządzenie G7 wyświetla informacje nt. stężenia glukozy na urządzenia wyświetlających.


Co zawiera opakowanie sensora

Sensor i aplikator

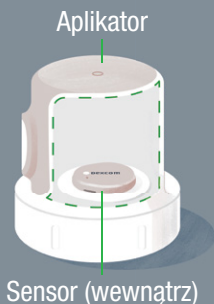

- Podczas konfiguracji przedstawimy sposób korzystania z aplikatora w celu wprowadzenia pod skórę końcówki wbudowanego sensora.
- Sensor przesyła odczyt poziomu glukozy do Twojego urządzenia wyświetlającego co 5 min.
- Sensor działa przez okres do 10 dni z 12-godzinny okres karencji.

Plaster overpatch

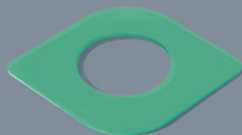

Po wprowadzeniu sensora, można zastosować plaster overpatch, aby pomóc w utrzymaniu sensora na skórze.

Instrukcja

Podczas konfiguracji należy użyć instrukcji wprowadzenia sensora podanej w aplikacji lub zapakowanej razem z plastrem overpatch.

G7 – Informacje podstawowe

Urządzenie G7 wyświetla informacje nt. stężenia glukozy na urządzeniu wyświetlających.

Jakie urządzenie wyświetlające konfigurujesz?

- **Aplikacja**

Idź do punktu: Konfiguracja aplikacji

- **Odbiornik**

Idź do punktu: Konfiguracja odbiornika

Korzystaj z maksymalnie 3 urządzeń wyświetlających

Uzyskuj informacje na temat poziomu glukozy w swoim telefonie, inteligentnym zegarku i odbiorniku Dexcom.

Możesz skonfigurować aplikację w telefonie i/lub odbiorniku w dowolnej kolejności.

Aplikacja lub odbiornik mogą być niedostępne w niektórych regionach.

Lista obsługiwanych smartfonów i systemów operacyjnych podana jest pod adresem **dexcom.com/compatibility**

Konfiguracja aplikacji w telefonie

1. Rozpoczęcie

Podczas konfiguracji konieczny jest dostęp do Internetu.

- Przejdź do sklepu App Store lub Google Play i pobierz aplikację Dexcom G7.




Dexcom G7

★★★★☆ 4.3 K

- Uruchom aplikację w telefonie.
- Zaloguj się lub utwórz konto.

3. Rozruch sensora

Wskaźnik czasu rozruchu sensora wskazuje kiedy zaczniesz otrzymywać odczyty i ostrzeżenia.

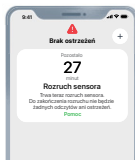

2. Konfiguracja

- Skonfiguruj aplikację w telefonie zgodnie z instrukcją w telefonie.
- Instrukcja wprowadzania sensora zawarta jest w instrukcji obsługi aplikacji w telefonie oraz w punkcie *Wprowadzanie sensora* instrukcji dostarczonej w opakowaniu sensora.
- Po wprowadzeniu i sparowaniu należy usunąć aplikator i oddać do recyklingu opakowanie Dexcom zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

4. Sesje odczytu danych z sensora

Przejdź do *Przewodnika użytkownika G7*, aby dowiedzieć się więcej.

Konfiguracja odbiornika

1. Wprowadzanie sensora

- Przed połączeniem z odbiornikiem należy wprowadzić sensor.
- Sposób wprowadzania opisano w instrukcji Wprowadzanie sensora dostarczonej w opakowaniu sensora.



2. Konfiguracja odbiornika

- Wciśnij przycisk **Wybierz** na 3–5 sekund, aby włączyć odbiornik.
- Skonfiguruj odbiornik zgodnie z instrukcją. Wprowadź sensor przed połączeniem.
- Po wprowadzeniu i sparowaniu należy usunąć aplikator i oddać do recyklingu opakowanie Dexcom zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

3. Rozruch sensora

Wskaźnik czasu rozruchu sensora wskazuje kiedy zaczniesz otrzymywać odczyty i ostrzeżenia.



4. Sesje odczytu danych z sensora

Przejdź do *Przewodnika użytkownika G7*, aby dowiedzieć się więcej.

Nawigacja w odbiorniku

Na ekranie odbiornika wskazane jest, którego przycisku należy użyć.

- Wciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków **Przewiń**, aby przewijać szybciej
- Użyj przycisku **Wybierz**, aby przejść do następnego pola

Przewiń w górę
Cofnij



Wybierz

Przewiń w dół



© 2024 Dexcom, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Produkt objęty ochroną patentową: dexcom.com/patents.

Dexcom, Dexcom Clarity, Dexcom Follow, Dexcom One, Dexcom Share oraz wszelkie powiązane znaki logo i znaki projektowe są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Dexcom, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. App Store jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych krajach. Google Play jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

dexcomG7



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
+1-858-200-0200
dexcom.com

Poza USA:
Należy skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy Dexcom.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany