

Buradan Başla



G7 Temel bilgiler

G7, glukoz bilgilerinizi görüntüleme cihazlarınızda görüntüler.


Sensör Kutusunda ne var

Sensör ve Aplikatör



- Kurulum sırasında, entegre sensörü cildinizin altına yerleştirmek için aplikatörü nasıl kullanacağınızı göstereceğiz.
- Sensör, görüntüleme cihaz(lar)ınıza her 5 dakikada bir, bir glukoz değeri gönderir.
- Sensör, en fazla 10 gün ve ek olarak 12 saat daha çalışır.

Koruyucu bant

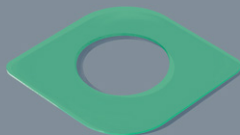

Sensörü yerleştirdikten sonra, sensörün cildinizde kalmasına yardımcı olmak için koruyucu bandı kullanabilirsiniz.

Talimatlar

Kurulum sırasında, uygulamada veya koruyucu bant ile aynı pakette gelen sensör yerleştirme talimatlarını kullanın.

G7 Temel bilgiler

G7, glukoz bilgilerinizi görüntüleme cihazlarınızda görüntüler.

Hangi Görüntüleme Cihazını Ayarlıyorsunuz?

- **Uygulama**

Bu bölüme gidin: Uygulamayı Ayarlama

- **Alıcı**

Bu bölüme gidin: Alıcıyı Ayarlama

Maksimum 3 Görüntüleme Cihazı kullan

Glukoz bilgilerinizi telefonunuz, akıllı saatiniz ve Dexcom alıcınız vasıtası ile alın.

Telefon uygulamasını, alıcıyı veya her ikisini de istediğiniz sıraya göre ayarlayabilirsiniz.

Uygulama veya alıcı tüm bölgelerde mevcut olmayabilir.

Desteklenen akıllı telefonlar ve işletim sistemleri için bu adrese bakın:
dexcom.com/compatibility

G7 Kullanıcı Kılavuzundaki Kullanım Göstergelerini inceleyin.

Tüm grafikler temsildir. Ürününüz farklı görünebilir.

Telefon Uygulamasının Kurulumu

1. Başlarken

Ayarlama sırasında güvenli internet bağlantısı gerekiyor.

- Dexcom G7 uygulamasını indirmek için App Store veya Google Play Mağazasına gidin.



Dexcom G7

★★★★☆ 4.3 K

- Telefon uygulamasını açın.
- Oturum açın veya bir hesap oluşturun.

3. Sensör Isınma Süresi

Sensör ısınma süresi, ölçüm değerlerini ve uyarıları ne zaman almaya başlayacağınızı gösterir.



2. Kurulum

- Telefon uygulamasının kurulumu için, telefon uygulaması talimatlarına uyun.
- Sensörü yerleştirme talimatları için, telefon uygulaması talimatlarına uyun veya sensör kutusundaki *Sensörü Yerleştirme* talimatlarına başvurun.
- Yerleştirme ve eşleştirme işlemlerinden sonra, aplikatörü atma ve Dexcom paketini geri dönüşüme gönderme için bölgenizde geçerli olan talimatlara uyun.

4. Sensör Oturumunuz

Daha fazla bilgi edinmek için *G7 Kullanıcı Kılavuzuna* gidin.

Alıcıyı Ayarlama

1. Sensörü yerleştir

- Alıcıyla eşleştirmeden önce sensörünüzü yerleştirmiş olmalısınız.
- Talimatlar için, sensör kutusundaki Sensör Yerleştirme talimatlarına başvurun.



3. Sensör Isınma Süresi

Sensör ısınma süresi, ölçüm değerlerini ve uyarıları ne zaman almaya başlayacağınıza gösterebilir.



2. Alıcının kurulumu

- Alıcıyı açmak için, **Seç** düğmesine 3–5 saniye basın.
- Alıcının kurulumu için, alıcı talimatlarına uyun. Eşleştirmeden önce sensörü yerleştirin.
- Yerleştirme ve eşleştirme işlemlerinden sonra, aplikatörü atma ve Dexcom paketini geri dönüşüme gönderme için bölgenizde geçerli olan talimatlara uyun.

4. Sensör Oturumunuz

Daha fazla bilgi edinmek için *G7 Kullanıcı Kılavuzuna* gidin.

Alıcı Navigasyonu

Alıcı ekranı, hangi düğmeleri kullanmanız gerektiğini belirtir.

- Daha hızlı kaydırmak için, **Kaydır** düğmesine basılı tutun
- Bir sonraki alana geçmek için **Seç** düğmesini kullanın

Yukarı kaydır
Geri git



Seç
Aşağı kaydır



© 2024 Dexcom, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

dexcom.com/patents patentleri kapsamındadır.

Dexcom, Dexcom Clarity, Dexcom Follow, Dexcom One, Dexcom Share ve ilgili tüm logo ve tasarım işaretleri Dexcom, Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'nin ABD ve diğer ülke ve bölgelerde tescilli bir ticari markasıdır. Google Play, Google LLC'nin bir ticari markasıdır. Diğer tüm markaların mülkiyetleri kendi sahiplerine aittir.

dexcom G7



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
+1-858-200-0200
dexcom.com

ABD'nin dışında:
Bölgenizdeki Dexcom temsilciniz
ile iletişime geçin



2797



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany