

# dexcomG6

## Använda din G6

- Välkommen
- Översikt av hemskärm
- Larm och varningar
- Behandlingsbeslut
- Starta en ny sensor eller sändare
- Avancerade app-funktioner
- Bilagor



# Innehållsförteckning

|                                                                  |           |                                                                                               |            |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kapitel 1: Välkommen! . . . . .</b>                           | <b>2</b>  | <b>Bilaga A: Felsökning. . . . .</b>                                                          | <b>52</b>  |
| 1.1 Låt oss komma igång. . . . .                                 | 2         | A.1 Noggrannhet – G6-värden<br>matchar inte blodsockervärdet som<br>visas på mätaren. . . . . | 53         |
| 1.2 Vad är nytt för G6. . . . .                                  | 3         | A.2 Noggrannhet – G6-värden<br>matchar inte symptom . . . . .                                 | 53         |
| <b>Kapitel 2: Säkerhetsförklaringar . .</b>                      | <b>5</b>  | A.3 Självhäftande plåster. . . . .                                                            | 54         |
| <b>Kapitel 3: Översikt av hemskärm. 19</b>                       | <b>19</b> | A.4 App avslutas . . . . .                                                                    | 56         |
| 3.1 Funktioner på hemskärmen. . . . .                            | 19        | A.5 Kalibrera din G6. . . . .                                                                 | 56         |
| 3.2 G6-värde, trendpil och diagram. 21                           | 21        | A.6 kan inte höra larm/varningar . . . . .                                                    | 57         |
| 3.3 Navigering och ikoner på<br>hemskärmen . . . . .             | 24        | A.7 Vanliga larm . . . . .                                                                    | 58         |
| 3.4 Se senaste G6-värden. . . . .                                | 25        | A.8 Avsluta sensorsession tidigt . . . . .                                                    | 61         |
| <b>Kapitel 4: Larm och varningar . . .</b>                       | <b>26</b> | A.9 Gap i diagram. . . . .                                                                    | 62         |
| 4.1 Larm och varningar om<br>låga värden . . . . .               | 26        | A.10 Ladda mottagare. . . . .                                                                 | 63         |
| 4.2 Larm om högt värde . . . . .                                 | 27        | A.11 Starta sensorsession utan<br>sensorkod . . . . .                                         | 63         |
| 4.3 Ändra varningar . . . . .                                    | 28        | A.12 Vatten och G6 . . . . .                                                                  | 69         |
| <b>Kapitel 5: Behandlingsbeslut . . . .</b>                      | <b>32</b> | <b>Bilaga B: Förläng din app . . . . .</b>                                                    | <b>70</b>  |
| 5.1 När använda blodsockermätare<br>istället för G6. . . . .     | 32        | <b>Bilaga C: Dexcom Clarity . . . . .</b>                                                     | <b>77</b>  |
| 5.2 När vänta och se . . . . .                                   | 33        | <b>Bilaga D: Ta hand om din G6 . . . .</b>                                                    | <b>78</b>  |
| 5.3 Hur använda trendpilarna . . . . .                           | 33        | <b>Bilaga E: Förpackningssymboler .</b>                                                       | <b>80</b>  |
| 5.4 Träna på att ta<br>behandlingsbeslut . . . . .               | 34        | <b>Bilaga F: Garanti . . . . .</b>                                                            | <b>84</b>  |
| <b>Kapitel 6: Starta en ny sensor eller<br/>sändare. . . . .</b> | <b>37</b> | <b>Bilaga G: Teknisk information . . .</b>                                                    | <b>89</b>  |
| 6.1 Starta en ny sensor . . . . .                                | 37        | <b>Bilaga H: Instruktioner för<br/>professionell användning . . . . .</b>                     | <b>96</b>  |
| 6.2 Starta en ny sändare . . . . .                               | 40        | <b>Bilaga I: Risker och fördelar . . . .</b>                                                  | <b>104</b> |
| <b>Kapitel 7: Avancerade<br/>app-funktioner . . . . .</b>        | <b>42</b> | <b>Bilaga J: Ordlista. . . . .</b>                                                            | <b>109</b> |
| 7.1 Dexcom Share och Follow . . . . .                            | 42        | <b>Index . . . . .</b>                                                                        | <b>113</b> |
| 7.2 Dexcom Follow . . . . .                                      | 44        |                                                                                               |            |
| 7.3 Kontrollera när larm/varningar<br>ljuder. . . . .            | 48        |                                                                                               |            |
| 7.4 Larm Schema . . . . .                                        | 49        |                                                                                               |            |

# Kapitel 1: Välkommen!

Grattis till att ha gjort Dexcom G6 kontinuerliga glukosmätare (CGM) till en del av ditt liv!

## 1.1 Låt oss komma igång

Du startar din G6 genom att följ instruktionerna i din Börja här-guide eller följ stegen i vägledningen (tillgänglig på [dexcom.com/downloadsandguides](https://dexcom.com/downloadsandguides)).



Både vägledningen och denna guide, Använda din G6, introducerar hemskärmen, vägleder dig genom att fatta behandlingsbeslut och visar dig hur du avslutar din sensorsession. Dessutom visar guiden hur du ställer in dina varningsljud, använder Dexcom Share (Share) och Dexcom Follow (Follow) samt skapar ett varningsschema i din app.

Bilder i denna vägledning är representativa. Din produkt kan se annorlunda ut.

## 1.2 Vad är nytt för G6

### Dexcoms G6-funktioner inkluderar:

- Inga fingerstickskalibreringar krävs!
- Bär sensor under 10 dagar
- Larm om snart akut lågt värde
- Paracetamol-blockering
- Nya app-funktioner
- Ny sensorapplikator
- Strömlinjeformad sändare och hållare för sändare
- Se din G6-information om din smartklocka och den nya frivilliga mottagaren

### Inga fingerstickskalibreringar

Med G6 behövs inga fingerstickskalibreringar! Efter att ha skrivit in sensorkoden kommer du inte motta några uppmaningar för kalibrering.

### 10 dagar sensorsession

Din sensorsession varar 10 dagar! Inställningar visar när din session tar slut så att du kan planera framåt.

### Larm om snart akut lågt värde

Varningen för snart akut lågt värde låter dig veta när ditt glukosvärde faller så pass snabbt att det kommer falla till 3,1 mmol/L på mindre än 20 minuter. Detta ger dig tid att vidta åtgärder för att förhindra lågt glukosvärde.

### Paracetamol/Acetaminofen-blockering

Tidigare kunde paracetamol påverka dina värden och få dem att verka högre än vad de verkligen var. Med G6 kan du ta paracetamol och fortfarande använda dina G6-värden. Att ta högre än den maximala dosen paracetamol (> 1 gram var 6:e timme hos vuxna) kan påverka sensorläsningar och få dem att se högre ut än de verkligen är.

## Nya app-funktioner

Använd din app för att skapa ett schema för nattetid så att du endast hör dina G6-larm och inte andra e-post- eller text-meddelande din telefon mottar.

## Sensorapplikation

Att sätta en sensor har aldrig varit enklare! Den nya sensorapplikationen låter dig sätta i sensorn snabbt och enkelt.

## Strömlinjeformad sändare och hållare för sändare

Den nya sändaren och dess hållare håller en lägre profil. Dessutom, när din sensorsession är över kan du enkelt öppna sändarens hållare för att ta bort sändaren.

## Stöd för smartklockor och ny frivillig mottagare

Du har alternativ för hur du ser din information. Du kan använda appen, den nya mottagaren med en pekskärm, Apple klocka och Android Wear.

# Kapitel 2: Säkerhetsförklaringar

## Dexcom G6-säkerhetsförklaringar

### Bruksanvisningar

Dexcom G6 system för kontinuerlig glukosmätning (system Dexcom G6 eller G6) är ett system för glukosmätning ämnat för personer som är 2 år eller äldre, inklusive gravida. Dexcom G6 är utformad för att ersätta fingerstick vid blodglukostest för dagliga behandlingsbeslut.

Tolkning av Dexcom G6-systemresultat bör baseras på glukostrenderna och flera läsningar i sekvens med tiden. Dexcom G6 hjälper även till att upptäcka hyperglykemi och hypoglykemi och på så sätt underlätta både akuta och långsiktiga behandlingsjusteringar.

Dexcom G6 är ämnad att användas av patienter hemma och på vårdinrättningar.

### Viktig användarinformation

Vänligen läs produktanvisningarna innan användning av G6. Indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och annan viktig användarinformation kan hittas i de produktanvisningar som är inkluderade med G6. Diskutera med din sjukvårdspersonal hur du bör använda den information som visas på G6 för att hjälpa till att hantera din diabetes. Produktanvisningarna innehåller viktig information om felsökning av G6 och prestandaegenskaper hos systemet.

### Kontraindikation

- **Ingen MRI/CT/Diathermy – MR-osäker**



Bär inte din CGM (sensor, sändare, mottagare eller smarta enhet) för magnetisk resonanstomografi, datortomografi-undersökning, eller högfrekvent elektrisk värmebehandling.

G6 har inte testats i dessa situationer. Magnetiska fält och värme kan skada komponenterna hos G6 vilket i sin tur kan få den att visa felaktiga glukosvärden (G6-värden) eller förhindra varningar. Utan G6-värden eller meddelanden om larm/varningar kan du missa ett akut lågt eller högt glukosvärde.

## Varningar

- **Läs bruksanvisningar**

Innan du använder din G6, läs noggrant den information som medföljer den. Annars kan du:

- inte använda G6 på rätt sätt
- inte förstå G6-information
- påverka hur väl den fungerar

- **Ignorera inte symptom på lågt/högt värde**

Ignorera inte hur du mår. Om dina glukosvarningar och G6-värden inte matchar hur du mår, använd din blodsockermätare till att fatta behandlingsbeslut eller, om nödvändigt, uppsök omedelbar medicinsk behandling.

Om du är osäker, använd din mätare.

- **Ingen siffra, ingen pil, inget behandlingsbeslut**

Om din G6 inte visar en siffra eller pil, eller om dina G6-värden inte matchar dina symptom, använd din mätare till att fatta behandlingsbeslut.

Ingen siffra, ingen pil, inget behandlingsbeslut. Om du är osäker, använd din mätare.

- **Använd inte om ...**

Använd inte G6 om du är på dialys eller kritiskt sjuk. Det är inte känt hur olika förhållanden eller medicineringar vanliga för dessa grupper påverkar prestationen hos systemet. G6-värden kan vara felaktiga för dessa personer.

Följ G6-instruktionerna. Annars kan du drabbas av ett akut lågt eller högt glukosvärde.

## Försiktighetsåtgärder

- **Undvik solskydd och insektsskydd**

Vissa hudvårdsprodukter, t.ex. solskydd och insektsskydd, kan få plasten i din G6 att spricka. Innan du använder din G6, se till att det inte finns några sprickor i din mottagare, sändare eller hållare för sändare. Om du hittar en spricka, vänligen kontakta din lokala Dexcom-representant. Låt inte dessa hudvårdsprodukter komma i kontakt med din G6. Efter användning av hudvårdsprodukter, tvätta händerna innan du rör din G6. Om någon hudvårdsprodukt kommer i kontakt med din G6, tvätta den omedelbart med en ren trasa.

- **Försiktighetsåtgärd avseende hydroxyurea**

Om du tar hydroxyurea kan dina G6-avläsningar vara felaktigt förhöjda och leda till missade varningar om hypoglykemi eller fel i besluten om diabeteshantering. Nivån av felaktighet kommer att bero på mängden hydroxyurea i kroppen. Använd din mätare.

## Säkerhetsförklaringar för uppstart

### Varningar

- **Använda mätare under uppstart**

När du startar en ny sensor kommer du inte få några G6-värden eller larm/varningar förrän du skriver in din sensorkod eller två kalibreringar. Använd din mätare till att ta behandlingsbeslut under sensorns 2 timmar långa uppvärmningsperiod.

Följ G6-instruktionerna. Annars kan du drabbas av ett akut lågt eller högt glukosvärde.

### Försiktighetsåtgärder

- **Använd korrekt sensorkod**

När du startar en ny sensor måste du skriva in en kod i displayenheten för att använda G6 utan kalibrering med fingerstick. Varje sensor har sin egen kod på baksidan av det självhäftande plåstret. Använd inte en kod från en annan sensor eller hitta på en kod. Om du inte skriver in korrekt kod kommer inte din sensor att fungera så bra och kan vara felaktig. Om du tappar bort sensorkoden kan du kalibrera G6 med hjälp av fingerstick.

Följ G6-instruktionerna. Annars kan du drabbas av ett akut lågt eller högt glukosvärde.

## Kalibrering säkerhetsförklaring

Kalibrering är inte nödvändig om användaren skriver in en sensorkod. Om användaren inte skriver in en sensorkod gäller följande varningar och försiktighetsåtgärder.

## Varningar

- **Vänta inte – kalibrera!**

Om du inte använt kalibreringskoden måste du manuellt kalibrera din G6 dagligen med hjälp av värdena från en gluksmätare och fingerstick. Du måste kalibrera omedelbart när G6 meddelar dig. Om du inte kalibrerat efter att du blivit meddelad kan din G6 visa felaktigt glukosvärde, så använd din gluksmätare till att fatta behandlingsbeslut fram tills du kalibrerat din G6.

- **Använd fingertoppar**

Använd blod från fingertoppar till att kalibrera din BG-mätare. Blod från andra platser kan vara mindre noggrant och inte så lämpligt.

Följ G6-instruktionerna. Annars kan du drabbas av ett akut lågt eller högt glukosvärde.

## Försiktighetsåtgärder

- **Var noggrann, var snabb.**

Skriv in det exakta BG-värde som visas på din mätare inom fem minuter efter att ha använt mätaren. Skriv inte in G6-värdet som en kalibrering.

Följ G6-instruktionerna. Annars kan du drabbas av ett akut lågt eller högt glukosvärde.

## Säkerhetsförklaringar för system/hårdvara/mjukvara

### Varningar

- **Sensortråd går av**

Ignorera inte brutna eller lossnade sensortrådar. En sensortråd kan vara kvar under din hud. Om detta händer, vänligen kontakta din lokala Dexcom-representant.

Om en sensortråd går av under din hud och du inte kan se den, försök då inte att ta bort den. För ytterligare information, kontakta din sjukvårdspersonal. Uppsök även professionell medicinsk hjälp om du har symptom på infektion eller inflammation – rödhet, svullnad eller smärta – på isättningsplatsen.

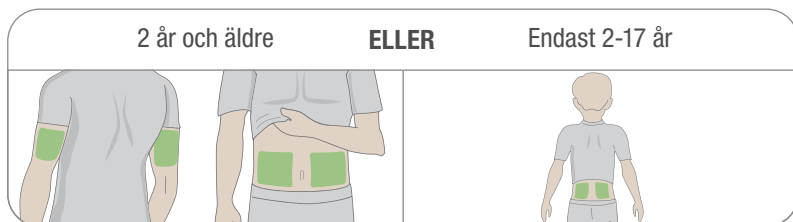
- **Isättningsplats: magen, armarnas baksida eller skinkan?**

Alla patienter kan använda magen eller armarnas baksida. Patienter mellan 2 och 17 år kan även använda sin övre skinka. Se efter en plats på magen, armarnas baksida eller övre skinkan där du har lite underhudsfett.

Sensorn är inte testad eller godkänd för andra platser. Prata med din vårdpersonal om vilken plats som är bäst för dig.

Åldrarna 2–17 år: sätt den i magen, armarnas baksida eller övre skinka

Åldrarna 18 eller äldre: sätt den i magen eller armarnas baksida



- **Förvaring**

Du kan förvara din sensor i rumstemperatur eller i ditt kylskåp – så länge temperaturen är mellan 2°C och 30°C. Förvara inte sensorer i frysen.

Följ G6-instruktionerna. Annars kan du drabbas av ett akut lågt eller högt glukosvärde.

## Försiktighetsåtgärder

- **Starta inte sensorn efter sista förbrukningsdag**

Sensorer ska inte användas efter sista förbrukningsdag eftersom det kan ge felaktiga resultat.

Sista förbrukningsdag anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD (år-månad-dag) bredvid timglasets på etiketten på sensorns förpackning.

- **Kontrollera förpackningen**

Använd inte sensorn om dess sterila förpackning skadats eller öppnats eftersom det kan orsaka en infektion.

- **Ren och torr hud**

Tvätta och torka dina händer och din isättningsplats innan du sätter i sensorn.

Tvätta dina händer med tvål och vatten, inte handsprit, och torka dem därefter innan du öppnar paketet med sensorn. Om dina händer är smutsiga när du sätter i sensorn kan du få bakterier i isättningsplatsen och drabbas av en infektion.

Tvätta isättningsplatsen med alkoholdukar för att förhindra infektion. Sätt inte i sensorn förrän huden är torr. Om isättningsplatsen inte är ren och helt torr riskerar du att få en infektion eller att hållaren för sändaren inte fastnar ordentligt.

Försäkra dig om att du inte har insektsskydd, solskydd, parfym eller kräm på huden.

- **Sätta i sensorn: saker att kontrollera**

Behåll säkringen på tills du placerat G6-applikatorn mot din hud. Om du tar bort säkringen först kan du skada dig själv av misstag genom att trycka av misstag på knappen som sitter i sensorn.

Byt isättningsplats för varje sensor. Om samma plats används för ofta tillåts huden kanske inte att läka, vilket kan orsaka ärrbildning eller hudirritation.

Placering av sensorn är viktig. Välja en plats:

- Minst 8 cm från insulinpumpen eller injektionsplatsen
- Inte nära skärp, ärr, tatueringar, irritation och ben
- Plats med låg sannolikhet för stötar, kollision eller som du ligger på när du sover

Följ G6-instruktionerna. Annars kan du drabbas av ett akut lågt eller högt glukosvärde.

## Säkerhetsförklaringar för sändare

### Varningar

- **Inspektera**

Använd inte en skadad eller sprucken sändare. En skadad sändare kan orsaka skador från elektriska stötar och kan göra att G6 inte fungerar korrekt.

- **Använd enligt instruktionerna**

Sändaren är liten och kan utgöra en kvävningsrisk. Placera den inte i munnen eller låt barn hålla den utan en vuxens tillsyn.

Följ G6-instruktionerna. Annars kan du drabbas av ett akut lågt eller högt glukosvärde.

## Försiktighetsåtgärder

- **Återanvänd – kasta inte bort**

Kasta inte bort sändaren när du är klar med en session. Sändaren kan återanvändas fram tills G6 meddelar dig om att sändarens batteri håller på att ta slut.

För vårdpersonal: vänligen se instruktioner om rengöring och desinfektering i instruktionerna för professionell användning.

Följ G6-instruktionerna. Annars kan du drabbas av ett akut lågt eller högt glukosvärde.

## Säkerhetsförklaringar för system

### Försiktighetsåtgärder

- **Behandlingsbeslut**

Använd din G6 och trendpil till att ta behandlingsbeslut.

- **Använd korrekt sändare, mottagare och sensor**

G6-komponenter är inte kompatibla med några föregående Dexcom-produkter. Blanda inte sändare, mottagare och sensorer från olika generationer.

- **Gå igenom säkerhetskontroll**

När du bär din G6, be om en kroppsvisitering och visuell inspektion istället för att gå igenom avancerad avbildningsteknik (AIT) för kroppsvisitationer eller placera någon del av G6 i bagaget som röntgas.

Du kan bära G6 när du går igenom en metalldetektor. Om du gör så, använd din mätare för behandlingsbeslut fram tills du lämnar säkerhetsområdet.

Eftersom vi inte testat varje röntgen och skanner vet vi inte om de kan skada G6.

Osäker på vilken sorts maskin det är? För säkerhets skull – be om en kroppsvisitering.

Följ G6-instruktionerna. Annars kan du drabbas av ett akut lågt eller högt glukosvärde.

# Säkerhetsanvisning för display-enheten

## Försiktighetsåtgärder

- **Håll sändaren nära displayenheten**

Förvara din sändare och displayenhet inom 6 meter utan några hinder (t.ex. väggar eller metall) mellan dem. Annars kanske de inte kan kommunicera med varandra. Om vatten finns mellan sändaren och displayenheten – till exempel om du duschar eller simmar – håll dem nära varandra. Räckvidden minskar eftersom *Bluetooth®* inte fungerar så bra genom vatten.

- **Få larm/varningar på displayenheten du använder**

För att få larm/varningar, ställ in dem på displayenheten du använder. Din mottagare kommer inte att få de larmen/varningar du ställer in via din app. Dessutom, din app kommer inte få de larm/varningar du ställer in på din mottagare.

- **Är den på?**

Om mottagaren eller den smarta enheten är avstängd kommer den inte att visa G6-värden eller larm/varningar. Försäkra dig om att din displayenhet är påslagen.

Följ G6-instruktionerna. Annars kan du drabbas av ett akut lågt eller högt glukosvärde.

## Säkerhetsförklaringar för smart enhet

### Varningar

- **Kontrollera inställningar**

Om din smart-enhet är på ljudlös och funktionen Alltid ljud är aktiverad (förvald inställning), avger endast följande meddelanden ett ljud (när ljudinställningen inte är Endast vibrering):

- Larm/varningar om glukos:
  - Akut lågt
  - Snart akut lågt
  - Lågt glukosvärde
  - Högt glukosvärde
  - Höjningshastighet
  - Fallhastighet
  - Larm om saknade värden

- Systemvarningar:
  - Kalibrering krävs (efter 2 timmars uppvärmning, visas endast när en sensorkod inte används)
  - Kalibreringsfel (visas bara när en användare skriver in en kalibrering; kalibrering krävs inte)
  - Sensorn har löpt ut
  - Fel i sensorn
  - Fel i sändare
  - Lagringsfel
  - Appen stoppades
- Undantag:
  - Upprepa: Vissa meddelanden är ljudlösa under det första visuella och vibrerande meddelandet för att sedan ljuda från och med det andra meddelandet. Om du inte rensar larmen kommer de upprepas på halv volym efter 5 minuter och på full volym efter 10 minuter.
  - *Bluetooth*: När du använder hörlurar, högtalare osv. via *Bluetooth* kanske larmet hörs på den primära smarta enheten eller tillbehöret. Alla tillbehör är olika. Prova ditt tillbehör så att du vet var larmen/varningarna kommer att höras.

- Meddelanden:
  - Försäkra dig om att din smarta enhet tillåter Dexcom app-meddelanden att visas på din låsskärm. Detta låter dig se meddelanden utan att behöva låsa upp telefonen.
  - Under inställning av G6, tillåt Dexcom app-meddelanden eller så kommer du inte få larm/varningar.
- Batteri: appen måste alltid köras i bakgrunden och kan tömma batteriet hos din smarta enhet. Håll batteriet laddat.
- Kompatibilitet: innan du uppgraderar din smarta enhet eller dess operativsystem, kolla **dexcom.com/compatibility**. Automatiska uppdateringar av appen eller din enhets operativsystem kan ändra inställningar eller stänga av appen. Uppdatera alltid manuellt och verifiera korrekta enhetsinställningar efteråt.
- Tid: låt datum och tid på din smarta enhet automatiskt uppdatera när du reser över tidszoner eller växlar mellan standard- och sommartider. Ändra inte tiden på din smarta enhet manuellt då det kan göra att tiden på trendskärmen blir felaktig och appen kan sluta visa uppgifter.
- **Android-användare måste tillåta Stör ej-åtkomst för att kunna använda appen.**

Följ G6-instruktionerna. Annars kan du drabbas av ett akut lågt eller högt glukosvärde.

## Försiktighetsåtgärder

### • Kontrollera tillbehörsenheter

Använder du hörlurar med din smarta enhet? Vad angående *Bluetooth* högtalare eller en smartklocka? Ha i åtanke vid användning av tillbehör att du kan få larm/varningar på endast en enhet eller tillbehör, eller inte alls. Säkerställ efter anslutning av ett tillbehör att inställningarna hos din smarta enhet tillåter dig att fortsätta motta larm/varningar.

Följ G6-instruktionerna. Annars kan du drabbas av ett akut lågt eller högt glukosvärde.

# Säkerhetsförklaring för mottagare

## Varningar

- **Använd inte om skadad**

Använd inte en skadad eller sprucken mottagare. En skadad mottagare kan orsaka skador från elektriska stötar och kan få G6 att fungera felaktigt.

- **Använd kabel enligt anvisningar**

Använd endast USB-kabeln enligt instruktionerna och förvara den säkert. Felaktig användning av USB-kabeln kan medföra risk för strypning.

Följ G6-instruktionerna. Annars kan du drabbas av ett akut lågt eller högt glukosvärde.

## Försiktighetsåtgärder

- **Testa högtalare och vibration**

Du måste höra och känna larm/varningar för att kunna reagera på dem, så testa regelbundet högtalaren och vibrationer hos mottagaren.

För att säkerställa att högtalare och vibrationer fungerar, sätt i mottagaren för laddning. Högtalarens testskärm dyker upp under ett par sekunder. Följ anvisningarna på skärmen för att testa högtalaren och vibrationer. Om du hör och känner dem, toppen! Om den inte piper eller vibrerar – kanske blev den våt eller tappades – kontakta din lokala Dexcom-representant.

- **Håll mottagaren ren och torr**

Sänk inte ner mottagaren i vatten och få inte smuts eller vatten i USB-porten. Det kan skada den.

Följ G6-instruktionerna. Annars kan du drabbas av ett akut lågt eller högt glukosvärde.

# Säkerhetsförklaringar för Dexcom Share

## Viktig användarinformation

Dexcom Share (Share) låter dig skicka din sensorinformation från din app till dina följares smarta enheter! Läs indikationerna, varningarna och försiktighetsåtgärder nedan för att få reda på hur du kan använda denna funktion säkert.

## Dela och hantera din diabetes – säkerhetsförklaringar

### Bruksanvisningar

- **Håll följare informerade**

Använd Share för att skicka din sensorinformation från din smarta enhet till dina följares smarta enheter.

- **Använd som sekundärt meddelande**

Informationen på din smarta enhet skickas direkt från din G6-sändare. När den finns på din enhet skickar Share den till dina följare. Så dina följares information är alltid äldre än din. Använd din nuvarande information till att hantera din diabetes, inte dina följares möjligen förlegade information.

Dina följare kan använda informationen de får till att ta kontakt med dig och hjälpa dig hantera din diabetes. Informationen de får är inte menad att användas till behandlingsbeslut, analys eller undervisning. Följare kan inte ändra din information.

### Varningar

- **Använd din G6 till att ta behandlingsbeslut**

Använd inte Share-information till att ta behandlingsbeslut vid behandling av lågt glukosvärde eller dosering för högt glukosvärde. Använd sensorinformationen på din G6 istället.

- **Uppsök sjukvårdsrådgivning**

Har din sjukvårdspersonal gett dig i uppdrag att övervaka dig själv? Fortsätt utföra dem. Att ha följare ersätter dem inte.

Följ G6-instruktionerna. Annars kan du drabbas av ett akut lågt eller högt glukosvärde.

# Share säkerhetsförklaringar för inställningar

## Varning

- **Följare måste följa och du måste dela**

Du måste sätta på Share för att den ska skicka din sensorinformation till dina följare. Följare måste ladda ner appen Dexcom Follow för att se vad du skickar.

Följ G6-instruktionerna. Annars kan du drabbas av ett akut lågt eller högt glukosvärde.

## Försiktighetsåtgärder

- **Det är inte följare som hanterar din diabetes, utan du**

Förlita dig inte på att dina följare informerar dig om att du måste ta ett behandlingsbeslut. Håll dig uppdaterad om din hantering av din diabetes. Titta på din G6 ofta. Svara på larm/varningar. Vänta inte på att en följare ska kontakta dig – de kanske inte får din sensorinformation på grund av ett tekniskt fel.

- **Kontrollera din smarta enhet och dina följares smarta enheter**

- Internetanslutning krävs: båda de smarta enheterna behöver vara anslutna till internet för att du ska kunna använda Share. Försök skicka din följare ett e-postmeddelande från din enhet. Om din följare mottar det på sina egna enheter är båda smarta enheterna anslutna.
- Batterier laddade: försäkra dig om att batterierna hos de smarta enheterna är laddade. Om batterierna hos din eller dina följares smarta enheter inte är laddade kommer Share inte att fungera.

- **Kontrollera din smarta enhet**

App påslagen: varje gång du sätter på din smarta enhet, tryck på G6-apen för att öppna den. Om appen inte är öppen kommer Share inte fungera.

- **Kontrollera följares smarta enheter**

- Ljud påslaget: Följare måste ha ljud eller vibration aktiverat på sina smarta enheter, så att de kan höra och/eller känna larm/varningar. Inställningar hos smarta enheter har prioritet över Follow-inställningar i appen.

- Glapp i delning: Följare kommer inte få din sensorinformation när deras smarta enheter är avslagna, inte anslutna till internet eller i Stör ej- eller flygplansläge. När följarna åtgärdar dessa problem kommer information som saknas att fyllas i och de kommer att åter att få information.
- De flesta mobiloperatörer har stöd för röst och data samtidigt. Kontrollera din och se till att följare kontrollerar deras. Om det inte finns stöd kommer inte Share att fungera under telefonsamtal. Share startas om när samtalet är över och skickar väntande meddelanden.
- **Ställ in Share så att följare kan hjälpa dig**
  - Ställ in Share för att säkerställa att dina följare har den information de behöver för att hjälpa dig att hantera din diabetes.
  - Fördröjningsfunktion: dina följare kommer inte få meddelanden förrän efter den fördröjning du ställt in.
  - Ingen Share-funktion: du kan avbryta delning med en följare när som helst genom att inte dela. Följare får ingen sensorinformation från dig förrän du väljer att dela den på nytt.

Följ G6-instruktionerna. Annars kan du drabbas av ett akut lågt eller högt glukosvärde.

# Kapitel 3: Översikt av hemskärm

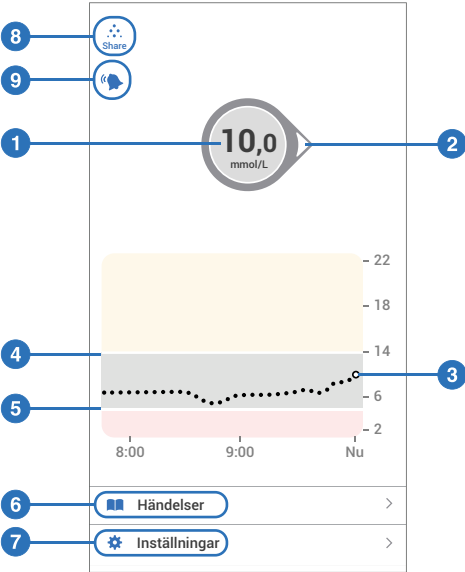
Du kommer spendera större delen av din tid på hemskärmen. Den ger dig dina G6-glukosvärden (G6-värden) och trendinformation och tar dig till andra G6-funktioner.

Nästa avsnitt beskriver funktionerna på hemskärmen. Senare kommer vi gå igenom hur du tolkar dina G6-värden, trendpilar och diagram följt av hur du navigerar till andra funktioner.

## 3.1 Funktioner på hemskärmen

Nedan är hemskärmar från Apple-appen, Android-appen och mottagaren. Medan glukosinformationen från sensorn är likadan är navigationen lite annorlunda.

För en lista med nuvarande kompatibla smarta enheter och operativsystem, gå till [dexcom.com/compatibility](https://dexcom.com/compatibility).

| Nyckel                                                                                                 | Apple                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sifфра och pil</b><br>1. G6-värde<br>2. Trendpil                                                    |  |
| <b>Diagram</b><br>3. Nuvarande G6-värde<br>4. Alarm om högt värde<br>5. Alarm om lågt värde            |                                                                                    |
| <b>Navigering och status</b><br>6. Händelser<br>7. Inställningar<br>8. Share<br>9. Alltid ljudd-status |                                                                                    |

## Nyckel

### Siffror och pil

1. G6-värde
2. Trendpil

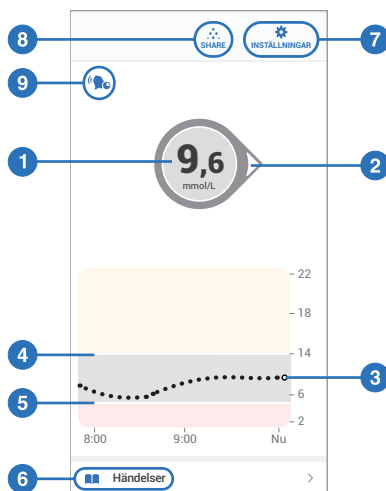
### Diagram

3. Nuvarande G6-värde
4. Alarm om högt värde
5. Alarm om lågt värde

### Navigering och status

6. Händelser
7. Inställningar
8. Share
9. Alltid ljud-status

## Android



## Nyckel

### Siffror och pil

1. G6-värde
2. Trendpil

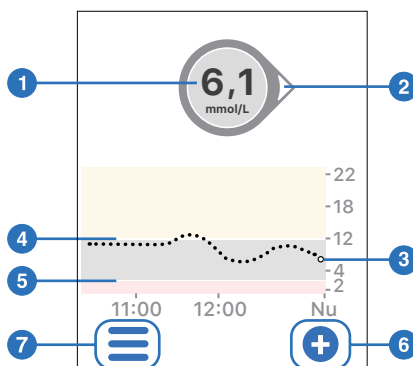
### Diagram

3. Nuvarande G6-värde
4. Alarm om högt värde
5. Alarm om lågt värde

### Navigering

6. Lägg till händelse
7. Meny

## Mottagare



Försäkra dig om att dina fingrar är torra när du rör skärmen.

## 3.2 G6-värde, trendpil och diagram

### Vart du är nu

På hemskärmen berättar siffror och färger var du befinner dig nu. Siffran är ditt G6-värde. Det uppdateras var 5 minuter. Bakgrundsfärgen hos siffran visar om ditt G6-värde är lågt, högt eller inom målområdet.



Röd = lågt



Gul = högt



Grå = inom målområdet

Bakgrundsfärgen är röd när ditt glukosvärde faller så snabbt att det kommer att vara lika med eller under 3,1 mmol/L inom 20 minuter (se Varning: akut lågt glukosvärde inom kort).

### Vart du är på väg

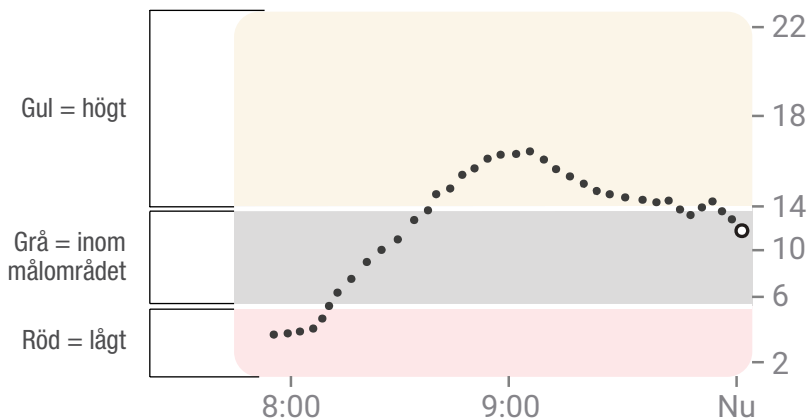
Kolla på trendpilarna för att se vart du är på väg.

| Trendpilar | Vart ditt glukosvärde är på väg         |                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>Stabilt</b>                          | Ändras upp till: <ul style="list-style-type: none"><li>• 0,06 mmol/L varje minut</li><li>• 1,8 mmol/L under 30 minuter</li></ul>          |
|            | <b>Långsamt stigande eller fallande</b> | Ändrar: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mellan 0,06–0,11 mmol/L varje minut</li><li>• Upp till 3,4 mmol/L på 30 minuter</li></ul> |
|            | <b>Stigande eller fallande</b>          | Ändrar: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mellan 0,1–0,2 mmol/L varje minut</li><li>• Upp till 5 mmol/L på 30 minuter</li></ul>     |
|            | <b>Snabbt stigande eller fallande</b>   | Ändras med mer än: <ul style="list-style-type: none"><li>• 0,2 mmol/L varje minut</li><li>• 5 mmol/L under 30 minuter</li></ul>           |
|            | <b>Ingen pil</b>                        | Kan inte fastställa trend                                                                                                                 |

## Var du har varit

Pricken på högra sidan är det nuvarande G6-värdet. Prickarna på den vänstra sidan är tidigare G6-värden.

Diagrammets bakgrundsfärger visar var dina G6-värden är:



## Problem på hemskärmen

Ibland får du inte G6-värden eller så ser du inte en siffra utan bara ett meddelande.

| Vad du ser                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vad det betyder                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ditt G6-värde är under 2,2 mmol/L                                                                                                      |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ditt G6-värde är över 22,2 mmol/L                                                                                                      |
| <b>App</b><br><br><div> <p>Varning för tappad signal</p> <p>Du kommer inte att få notiser, varningar eller resultat från glukosmätningar från sensorn.</p> <p>OK</p> </div> | <b>Mottagare</b><br><br><div> <p> <b>Tappad signal Meddelande</b></p> <p>Du kommer inte att få notiser, varningar eller resultat från glukosmätningar från sensorn.</p> <p>OK</p> </div> | Ett felmeddelande betyder att din G6 inte fungerar och att du inte kommer få larm/varningar eller G6-värden. (Se bilaga A Felsökning.) |

### 3.3 Navigering och ikoner på hemskärmen

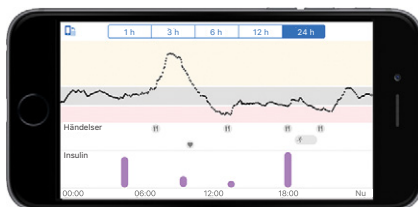
Du kan komma åt andra G6-funktioner med hjälp av navigeringsikonerna.

Appen och ikoner på mottagarens hemskärm är nästan samma. Appen har extra funktioner.

| Ikon                                                                                                                    |                                                                                                        | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                        | <b>Share-ikon (endast app):</b> Låter dig sända din glukosinformation till dina följare. Se avsnitt 7 Avancerade app-funktioner för mer information.                                                                                                           |
|                                        |                                                                                                        | <b>Alltid ljud-ikon (endast app):</b> Låter dig kontrollera huruvida dina larm/varningar kommer ljuda även när din telefon är satt på ljudlös/stör ej. För att ändra detta, gå till inställningar. Se avsnitt 7 Avancerade app-funktioner för mer information. |
| <b>App</b><br> <b>Händelser</b>        | <b>Mottagare</b><br>  | <b>Händelser/lägg till händelse:</b> låter dig anteckna insulinintag, kolhydrater, träning och hälsorelaterade händelser.                                                                                                                                      |
| <b>App</b><br><br><b>INSTÄLLNINGAR</b> | <b>Mottagare</b><br> | <b>Inställningar/meny:</b> låter dig redigera larm, få hjälp, ändra inställningar, ställa in ljud, med mera.                                                                                                                                                   |

### 3.4 Se senaste G6-värden

För att se ditt diagram med 1, 3, 6, 12 och 24 timmar (med händelser) på appen, vänd din smarta enhet på sidan (landscapsvisning) och tryck på flikarna på toppen av skärmen.



På mottagaren, tryck på diagrammet för att byta mellan 1-, 3-, 6-, 12- och 24-timmars visning.

# Kapitel 4: Larm och varningar

Dina larm och varningar hjälper dig att hålla dig inom ditt målområde. De ljuder och/eller vibrerar när du:

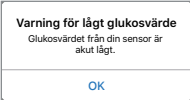
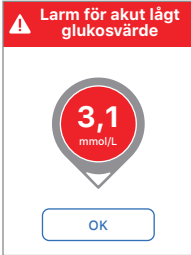
- Är utanför ditt målområde
- Är vid eller under 3,1 mmol/L
- Kommer vara på 3,1 mmol/L om mindre än 20 minuter

Vibrationer från larm/varning känns likadant som de skapade av meddelanden du får via andra appar på din smarta enhet. Enda sättet att veta om det är från din G6 är att titta på din smarta enhet.

Behåll dina varningar på: de är en viktig del för att fatta G6-behandlingsbeslut. Prata med din vårdpersonal om bästa inställningar för varningar om låga och höga värden för dig.

Vid användning av appen och mottagaren samtidigt, ändra varningsinställningar och bekräfta larm/varningar på varje enhet.

## 4.1 Larm och varningar om låga värden

| Vad du ser                                                                                          |                                                                                                            | Vad det betyder                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>App</b><br><br> | <b>Mottagare</b><br><br> | <b>Larm för akut lågt värde</b><br><br>Låter dig veta när ditt glukosvärde är vid eller lägre än 3,1 mmol/L.<br><br>Du kan inte ändra eller stänga av larmet för akut lågt värde. |

| Vad du ser                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           | Vad det betyder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>App</b><br><br><div> <p>Varning: akut lågt glukosvärde inom kort<br/>Agera nu för att förhindra lågt glukosvärde.</p> <p>OK</p> </div> | <b>Mottagare</b><br><br><div> <p>Akut lågt glukosvärde inom kort<br/>Agera nu för att förhindra lågt glukosvärde</p>  <p>3,9 mmol/L</p> <p>OK</p> </div> | <b>Larm om snart akut lågt värde</b><br><br><p>Låter dig få vet att ditt värde faller <b>snabbt</b>. Du kommer vara vid eller lägre än 3,1 mmol/L om 20 minuter oavsett var du befinner dig nu.</p> <p>Du kan ändra dina larm för snart akut lågt värde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Förvald inställning är på; kan stängas av</li> <li>Välj ljud</li> </ul>                 |
| <b>App</b><br><br><div> <p>Varning för lågt glukosvärde<br/>Glukosvärdet från din sensor är lågt.</p> <p>OK</p> </div>                    | <b>Mottagare</b><br><br><div> <p>Larm om lågt glukos</p>  <p>4,1 mmol/L</p> <p>OK</p> </div>                                                             | <b>Larm om lågt glukos (lågt glukos)</b><br><br><p>Låter dig få veta att ditt G6-värde är under ditt målområde men att det inte faller tillräckligt fort för att få en varning om snart akut lågt värde.</p> <p>Du kan ändra dina varningar för lågt värde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Förvald inställning är på; kan stängas av</li> <li>Välj larmnivå och ljud</li> </ul> |

## 4.2 Larm om högt värde

| Vad du ser                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       | Vad det betyder                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>App</b><br><br><div> <p>Varning för högt glukosvärde<br/>Glukosvärdet från din sensor är högt.</p> <p>OK</p> </div> | <b>Mottagare</b><br><br><div> <p>Larm om högt glukosvärde</p>  <p>15,3 mmol/L</p> <p>OK</p> </div> | <b>Larm om högt glukosvärde (högt värde)</b><br><br><p>Låter dig få veta när ditt G6-sensorvärde är över ditt målområde.</p> <p>Du kan ändra dina larm för varningar om högt värde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Förvald inställning är på; kan stängas av</li> <li>Välj larmnivå och ljud</li> </ul> |

## 4.3 Ändra varningar

Tala med din vårdpersonal innan du ändrar dina inställningar för varningar. De kan hjälpa dig hitta de bästa inställningarna för att hantera din diabetes utan allt för många varningar.

Gå till **Inställningar > Larm** (Mottagare: **Meny > Larm**) och tryck på ett larm för att ändra det.

### App

[← Inställningar](#) Notiser

Alltid ljud ☒

Tillåt att varningar låter även när Ljud av-funktionen eller Stör ej är aktiverade. Dessa kan inte tystas: varning för akut lågt glukosvärde, sändarfel och sensorfel.

Varning för akut lågt glukosvärde 3,1 mmol/L >

Akut lågt glukosvärde inom kort På >

Låg 4,4 mmol/L >

Hög 11,1 mmol/L >

Ökningshastighet Av >

Sänkningens hastighet Av >

Tappad signal På >

Inga avläsningar På >

SCHEMALAGD

Notis-schema ☒

### Mottagare

Notiser

Hög ▲

Låg ▼

Akut lågt glukosvärde inom kort

Ökningshastighet

Sänkningens hastighet

Tappad signal

Inga avläsningar ▼

## Ställa in varningsljud

Du kan välja varningsljud som passar bäst för dig. I appen, tryck på ljud från varningar för att välja ett annat ljud för den varningen.

[< Notiser](#) Varning för högt glukosvärde

Varning för högt glukosvärde

☒

Meddela mig vid glukosvärde över

11,1 mmol/L >

Upprepa

Aldrig >

Ljud

Varning för högt glukosvärde >

Varningen för högt glukosvärde kommer att varna dig när din glukosnivå stiger över den inställda nivån.

I motsats till appen väljer du ett ljud för alla dina larm/varningar i mottagarens ljudmeny. Denna lista visar olika ljud för larm/varningar tillgängliga i mottagaren med start från den tystaste.

| Ikon                                                                                | Ljud för mottagare                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Vibrera endast</p> <p>Undantag: larm för akut lågt glukosvärde, larm för snart lågt glukosvärde, fel i sensor och sändare piper och vibrerar alltid.</p> |
|  | <p>Tyst</p>                                                                                                                                                 |
|  | <p>Mellan</p>                                                                                                                                               |

| Ikon                                                                              | Ljud för mottagare                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Uppmärksam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stigande ton hos larm för höga och stigande värden</li> <li>• Fallande ton hos larm för låga och fallande värden</li> </ul>     |
|  | <p>Hypo upprepa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mellan-ljud</li> <li>• Upprepar varningar för akut lågt värde och varningar för snart akut lågt värde var 5 sekund</li> </ul> |



Tryck på Testa ljud för att testa det ljud du valt. Detta väljer inte ett ljud; detta låter dig bara höra det.

## Använd larm till att uppnå mål

Arbeta med din sjukvårdspersonal för att ställa in dina larm till att hjälpa dig uppnå dina mål. Till exempel, är du orolig över stapling av insulin – ta doser för tätt inpå varandra?

För att använda din G6 som ett verktyg för att se och vänta – och undvika stapling av insulin – kan din sjukvårdspersonal råda dig att sätta på upprepningsfunktionen i dina inställningar för varning om högt värde. På så sätt, när du får en varning om högt värde och bekräftar det kommer du påminnas igen efter den tid du ställt in för Upprepa ända tills ditt G6-värde är tillbaka inom ditt målområde. Detta påminner dig om att kontrollera dina G6-värden senare för att säkerställa att de har sjunkit.

Skärmen nedan visar en varning om högt värde upprepas med 2 timmars intervall. Efter att du fått din varning om högt värde, 2 timmar senare, om du inte återvänt till målområdet, kommer din varning om högt värde att upprepas för att påminna dig om att ditt värde fortfarande är högt och att du kan vilja ta mer insulin. Om de 2 timmarna passerar och du är tillbaka inom ditt målområde kommer varningen om högt värde inte att upprepas.

## App

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <a href="#">Tillbaka</a>   | Upprepa |
| Upprepa varje 2 tim, 0 min |         |
| 0                          |         |
| 1                          |         |
| 2                          | 00      |
| 3                          | 05      |
| 4                          | 10      |
|                            | 15      |

## Mottagare

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Få upprepade varningar om högt glukosvärde |   |
| 120                                        | ▲ |
| minuter                                    | ▼ |
| Spara                                      |   |

Ändringar av larm du utför i din app reflekteras inte i din mottagare – och vice versa. Om du vill att larmen är lika måste du utföra ändringar i båda enheter.

# Kapitel 5: Behandlingsbeslut



Med Dexcom kan du ta behandlingsbeslut utan att använda din blodsockermätare.

Oavsett om du är ny användare av Dexcom eller erfaren sådan bör du fortsätta använda din mätare till att ta behandlingsbeslut fram tills du vet hur Dexcom fungerar för dig. Skynda inte! Det kan ta dagar, veckor eller månader för dig att känna dig säker i din användning av din CGM till att fatta behandlingsbeslut.

Ibland måste du använda din mätare istället för G6. Andra tillfällen är det bäst att inte behandla utan bara se och vänta.

Arbeta med din vårdgivare till att utvärdera vad som fungerar bäst för dig när du tar behandlingsbeslut.

## 5.1 När använda blodsockermätare istället för G6

Lita på din blodsockermätare för behandlingsbeslut i dessa situationer:

- G6 visar inte både en siffra och en pil.

Till exempel, om din hemskärm visar något av följande:

| När du ser                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 | Meddelande             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | Ingen siffra           |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | Ingen pil              |
| <b>App</b><br><br><div><p>Varning för tappad signal</p><p>Du kommer inte att få notiser, varningar eller resultat från glukosmätningar från sensorn.</p><p>OK</p></div> | <b>Mottagare</b><br><br><div><p> <b>Tappad signal</b><br/><b>Meddelande</b></p><p>Du kommer inte att få notiser, varningar eller resultat från glukosmätningar från sensorn.</p><p>OK</p></div> | Ingen siffra eller pil |

Ingen siffra, ingen pil, inget CGM-behandlingsbeslut.

- Ditt G6-värde matchar inte dina symptom.

Till exempel: du mår inte bra men ditt G6-värde visar att du är inom målområdet. Tvätta dina händer noggrant och använd din mätare. Om mätarens värde matchar dina symptom, använd då mätarens värde till att ta behandlingsbeslut. Därefter, om du vill ställa in din G6 med din mätare, kalibrera. Du måste inte kalibrera men du kan. (Se bilaga A Felsökning).

Med andra ord, om du är osäker, använd din mätare.



## 5.2 När vänta och se

Det finns tillfällen då du inte borde behandla utan bara vänta och se.

**Stapling av insulin:** Stapla inte insulin genom att ta doser för tätt inpå varandra. Vänta minst 2 timmar mellan doser så att du inte av misstag tvingar ner ditt glukosvärde för lågt. Ibland är det bättre att vänta och se.



## 5.3 Hur använda trendpilarna

Trendpilarna hjälper dig bestämma hur stor dos du ska ge.



**Uppåtpil:** ta lite mer insulin



**Nedåtpil:** ta lite mindre insulin

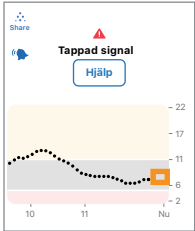
## 5.4 Träna på att ta behandlingsbeslut

Träna på att ta behandlingsbeslut.

Diskutera dem med din sjukvårdspersonal och granska:

- När du behöver använda din mätare
- Hur du kan använda din G6
- När du ska se och vänta istället för att behandla

| Situation                                                                                                                                                                                         | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tidigt på morgonen:</b></p> <p>Ditt larm om lågt värde väcker dig.</p> <p><b>Du ser:</b></p>               | <p><b>Tänk på:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Siffror och pil: du har båda.</li><li>• Siffror: ditt glukosvärde är lågt – 4,4 mmol/L.</li><li>• Långsamt fallande pil: Glukosvärdet faller med upp till 3,4 mmol/L på 30 minuter.</li></ul> <p><b>Vad du borde göra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Använd din G6 till att behandla som du normalt borde.</li></ul> |
| <p><b>Frukosttid:</b></p> <p>Nittio minuter senare sitter du ner för att äta frukost.</p> <p><b>Du ser:</b></p>  | <p><b>Tänk på:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Siffror och pil: du har båda.</li><li>• Uppåtpil: Ditt glukosvärde stiger med 5 mmol/L under 30 minuter.</li></ul> <p><b>Vad du borde göra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Använd din G6 till att behandla. Ta din normala dos och, på grund av uppåtpilen, lite till.</li></ul>                                      |

| Situation                                                                                                                                                                                                                 | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Efter frukost:</b></p> <p>Trettio minuter efter dosering för frukosten får du en varning om högt värde.</p> <p><b>Du ser:</b></p>  | <p><b>Tänk på:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Insulin: du tog insulin för mindre än en timme sedan. Det tar tid för att verka.</li> </ul> <p><b>Vad du borde göra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingenting. Se och vänta för att undvika stapling av insulin. Behandla inte förrän efter minst en till en och en halv timme.</li> </ul> |
| <p><b>En timme senare:</b></p> <p>Du såg och väntade.</p> <p><b>Du ser:</b></p>                                                          | <p><b>Tänk på:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Insulin: insulinet du tog med frukosten tog dig tillbaka till målområdet.</li> </ul> <p><b>Vad du borde göra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingenting. Ingen behandling krävs.</li> </ul>                                                                                                 |
| <p><b>Halvvägs in på morgonen:</b></p> <p>Du är på väg att ta ett snacks.</p> <p><b>Du ser:</b></p>                                     | <p><b>Tänk på:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen siffra och ingen pil: du har ingendera. Notera gapet i G6-värdena.</li> <li>Felmeddelande: du får inga G6-värden.</li> </ul> <p><b>Vad du borde göra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Använd din mätare till att ta behandlingsbeslut.</li> </ul>                                     |

| Situation                                                                                                                                                                                                    | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Lunchtid:</b></p> <p>Tre timmar senare är du på väg att dosera för lunch.</p> <p><b>Du ser:</b></p>                   | <p><b>Tänk på:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siffra och pil: du har båda.</li> <li>• Nedåtpil: Ditt glukosvärde faller med 5 mmol/L under 30 minuter.</li> </ul> <p><b>Vad du borde göra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Använd din G6 till att behandla. På grund av nedåtpilen, ta lite mindre.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| <p><b>Halvvägs in på eftermiddagen:</b></p> <p>Det är 3 timmar efter lunch.</p> <p><b>Du ser:</b></p>                       | <p><b>Tänk på:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siffra och ingen pil: du har inte någon pil.</li> </ul> <p><b>Vad du borde göra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Använd din mätare till att ta behandlingsbeslut.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Tidigt på kvällen:</b></p> <p>Strax innan middagen känner du dig lite skakig och svettig.</p> <p><b>Du ser:</b></p>  | <p><b>Tänk på:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Symptom och G6-värden: dina symptom matchar inte din sensors G6-värden.</li> </ul> <p><b>Vad du borde göra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tvätta dina händer noggrant och ta ett stickprov. Använd värdet hos din blodsockermätare om det matchar dina symptom för behandlingsbeslut. Överväg därefter att kalibrera din G6 så att den stämmer överens med din mätare. Du måste inte kalibrera men du kan.</li> </ul> |

# Kapitel 6: Starta en ny sensor eller sändare

En sensor-session varar i upp till 10 dagar. En sändare kan återanvändas i ca 3 månader. Detta avsnitt förklarar hur du startar en ny sensor eller sändare när den nuvarande går ut.

Om du sätter i din första sensor ska du följa anvisningarna i Börja här-guiden som medföljde ditt system.

## 6.1 Starta en ny sensor

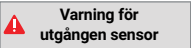
Ditt system varnar dig när du har 24 timmar kvar av din session, sedan 6 timmar, 2 timmar och slutligen 30 minuter. Du kan starta en ny sensor-session:

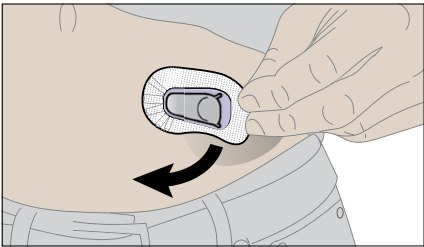
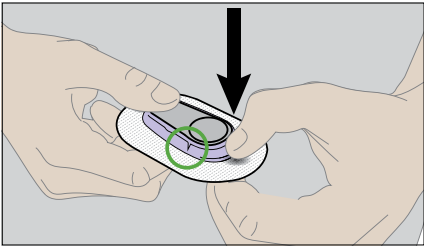
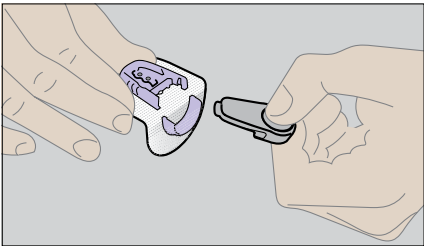
- Automatiskt: Vänta tills din sensor går ut
- Manuellt: Avsluta sessionen tidigt när du vill

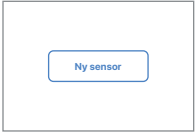
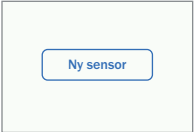
### Starta en ny sensor automatiskt

När din sensor går ut får du inga sensorvärden innan du startar en ny sensor-session. Följ dessa steg för att:

- Avlägsna sensorn från din kropp
- Avlägsna sändaren från hållaren
- Starta en ny sensor-session

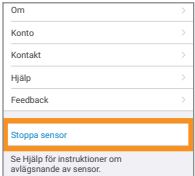
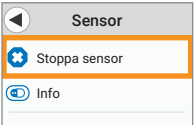
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>App</b><br><br><br><b>Byt sensor nu</b><br><br>Du kommer inte att få varningar, larm eller glukosvärden från sensorn förrän du byter din sensor.<br><br><a href="#">Instruktioner för avlägsnande av sensor</a><br><br><input type="button" value="OK"/> | <b>Mottagare</b><br><br><br><br>Din sensor-session är avslutad.<br><b>Ersätt din sensor.</b><br>Du kommer inte att få varningar, larm eller glukosvärden från sensorn.<br><br><input type="button" value="OK"/> | <p>G6 talar om när du ska ersätta sensorn.</p> <p>Klicka på <b>OK</b>.</p> |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |  | <p>Dra försiktigt av plåstret från kanten.</p>                                                                                                                                                                                                             |
| 3 |  | <p>Dela den purpurroda sändarhållaren vid skårorna.</p>                                                                                                                                                                                                    |
| 4 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skjut ut sändaren ur hållaren.</li> <li>• Spara sändaren för användning med nästa sensor.</li> <li>• Släng häftan i enlighet med dina lokala riktlinjer för komponenter som kommer i kontakt med blod.</li> </ul> |

|   |                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <p><b>App</b></p>  | <p><b>Mottagare</b></p>  | <p>Klicka på <b>Ny sensor</b>.</p> <p>Följ anvisningarna på skärmen för att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange den nya sensorkoden</li> <li>• Sätt i den nya sensorn och sätt tillbaka din nuvarande sändare (du hittar anvisningar i <b>Börja här</b>-guiden och i videoguiderna på <b>dexcom.com</b>)</li> <li>• Starta 2-timmars-uppvärmningen av sensorn</li> </ul> |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Starta ny sensor manuellt

För att avsluta en sensorsession tidigt när du vill:

|   |                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>App</b></p>  | <p><b>Mottagare</b></p>  | <p>App: Gå till <b>Inställningar &gt; Stoppa sensor</b></p> <p>Mottagare: Gå till <b>Meny &gt; Sensor &gt; Stoppa sensor</b></p> |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sedan, för att:

- Avlägsna sensorn från din kropp
- Starta en ny sensor

Följ anvisningarna i Starta en ny sensor automatiskt från steg 2.

## 6.2 Starta en ny sändare

Kom ihåg att din sändare kan återanvändas i ca 3 månader. När det är dags att parkoppla en ny sändare måste du även starta en ny sensorsession.

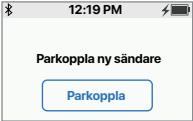
Ditt system varnar när du har 3 veckor kvar och sedan igen när du har 2 veckor kvar. När du har använt sändaren för dess sista sensorsession uppmanas du av systemet att ersätta din sensor och sändare.

Du kan starta en ny sändare:

- Automatiskt: Vänta tills den nuvarande sändaren går ut
- Manuellt: Avsluta den tidigt när du vill

### Starta en ny sändare och sensor automatiskt

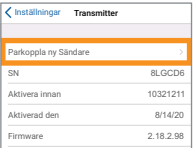
När din sändare går ut uppmanas du att parkoppla en ny sändare. Följ dessa steg:

|   |                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>App</b></p>  | <p><b>Mottagare</b></p>  | <p>Klicka på <b>Parkoppla</b>.</p> <p>Följ anvisningarna på skärmen för att:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>App:</b> Ange den nya sändarens SN och den nya sensorkoden</li><li>• <b>Mottagare:</b> Ange den nya sensorkoden och den nya sändarens SN</li><li>• Sätt i den nya sensorn och fäst den nya sändaren (du hittar anvisningar i <b>Börja här</b>-guiden och i videoguiderna på <b>dexcom.com</b>)</li><li>• Starta 2-timmars-uppvärmning av sensorn</li></ul> |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

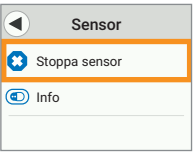
## Starta en ny sändare och sensor manuellt

För att avsluta en sändare tidigt när du vill ska du följa dessa steg:

### App

|   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | <p>Gå till <b>Inställningar &gt; Sändare &gt; Parkoppla ny</b></p> <p>Följ anvisningarna på skärmen för att:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stoppa din sensor</li><li>• Ange den nya sändarens SN och den nya sensorkoden</li><li>• Sätt i den nya sensorn och fäst den nya sändaren (du hittar anvisningar i <b>Börja här</b>-guiden och i videoguiderna på <b>dexcom.com</b>)</li><li>• Starta 2-timmars-uppvärmningen av sensorn</li></ul> |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Mottagare

|   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | <p>Stoppa din sensor. Gå till <b>Meny &gt; Sensor &gt; Stoppa sensor</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 |  | <p>Gå till <b>Meny &gt; Sändare &gt; Parkoppla ny</b></p> <p>Följ anvisningarna på skärmen för att:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ange den nya sensorkoden och den nya sändarens SN</li><li>• Sätt i den nya sensorn och fäst den nya sändaren (du hittar anvisningar i <b>Börja här</b>-guiden och i videoguiderna på <b>dexcom.com</b>)</li><li>• Starta sensorn och 2-timmars-uppvärmningen av sensorn</li></ul> |

# Kapitel 7: Avancerade app-funktioner

## 7.1 Dexcom Share och Follow

Du kan använda Share till att bjuda in personer (dina följare) till att se dina nuvarande G6-värden och -trender på deras smarta enheter. (För en lista med kompatibla enheter, gå till: [dexcom.com/compatibility](https://dexcom.com/compatibility).) Share hjälper dina följare att stödja dig.

### Inställningar för Share och Follow

Vid användning av Share och Follow, kom ihåg:

- Du måste hålla din G6-app öppen för att dela glukosinformation och aviseringar med dina följare
- Batteri: håll displayenheten laddad
- Internet:
  - Ansluta smarta enheter till internet
  - Flygplansläge är av
- Röst och data samtidigt:

Stödjer mobiloperatören röst och data samtidigt (simultan röst och data)?  
Om inte, kommer Share inte att skicka data under samtal. När ditt samtal är över kommer Share att fylla i missad glukosinformation.

Share och Follow kommer inte fungera om något är fel med den smarta enheten. Läs din smarta enhets instruktioner för felsökning.

## Starta Share och bjud in följare

För att starta Share, tryck på Share-ikonen på din apps hemskärm. Följ därefter instruktionerna på skärmen.

När du startat delningen, bjud in någon att följa dig genom att trycka på Bjud in följare.

Du väljer vad dina följare kan se under följarinställningar, men de kan också själva välja sina inställningar i Follow-appen.

|                                                                                                                                                                                        |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <a href="#">&lt; Tillbaka</a>                                                                                                                                                          | <b>Inställningar för följare</b>    |
| Ställ in notisinställningar för Kevin.<br>Kevin kan ändra dessa inställningar senare.                                                                                                  |                                     |
| <b>Akut lågt</b>                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Meddela under</b>                                                                                                                                                                   | 3,1 mmol/L >                        |
| Din följare kommer att bli underrättad när glukosvärdet från din sensor sjunker under meddelandenivån Akut lågt.                                                                       |                                     |
| <b>Lågt</b>                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Meddela under</b>                                                                                                                                                                   | 4,4 mmol/L >                        |
| <b>I mer än</b>                                                                                                                                                                        | 30 min >                            |
| Din följare kommer att bli underrättad när glukosvärdet från din sensor sjunker under meddelandenivån Lågt under den inställda tiden.                                                  |                                     |
| <b>Högt</b>                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Meddela över</b>                                                                                                                                                                    | 11,1 mmol/L >                       |
| <b>I mer än</b>                                                                                                                                                                        | 1 tim >                             |
| Din följare kommer att bli underrättad när glukosvärdet från din sensor sjunker under meddelandenivån Högt under den inställda tiden.                                                  |                                     |
| <b>Ingen ytterligare information</b>                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>I mer än</b>                                                                                                                                                                        | 1 tim >                             |
| Din Följare kommer att bli underrättad om de slutar få glukosvärden från dig.<br><br>Din följare kommer inte att få:<br>· Glukosmätningar<br>· Notiser<br>· Uppdateringar av trendgraf |                                     |
| <div>Nästa</div>                                                                                                                                                                       |                                     |

När dina inställningar för följare uppfyller dina behov, tryck på Nästa och därefter på Skicka inbjudan. Share skickar en inbjudan via e-post till dina följare.

## Följar-status

Listan med följare visar dina följares status och låter dig bjuda in nya.

Nedan är olika status och vad de betyder:

| Status                                                                            | Beskrivning                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bjud in nya följare.                                                                               |
|  | Du bjöd in en följare. De har inte accepterat ännu.                                                |
|  | Följare accepterade inte inbjudan inom 7 dagar. För att bjuda in igen, tryck på Lägg till följare. |
|  | Följare får meddelande(n).                                                                         |
|  | Följare ser trender och diagram.                                                                   |
|  | Följare slutade följa dig.                                                                         |

## 7.2 Dexcom Follow

Dina följare kan känna sig mer säkra om de mottar din G6-information nästan samtidigt som dig.

### Ytterligare rekommenderade inställningar för följare

Ställa in och köra Follow, ställa in volymen hos följares smarta enhet:

- Ljudlös/stör ej är av
- Ljud är på

## Ställa in Follow

1. Följare mottar och öppnar din e-postinbjudan på den smarta enhet de kommer använda för att följa dig.
2. De installerar och startar Dexcom Follow-appen på deras smarta enhet.  
E-postadressen innehåller en länk för att ladda ner appen eller så kan de ladda ner den från App Store.

Nu ser dina följare din G6-information!

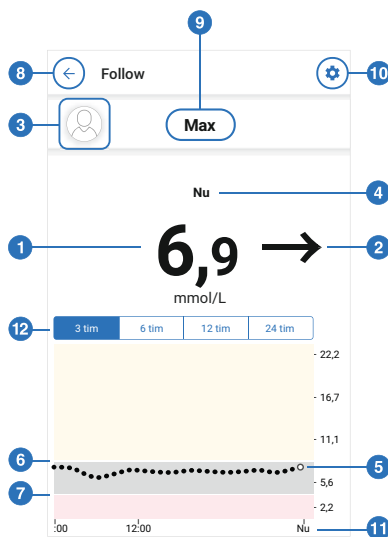
## Vad Follower ser

| Nyckel                                                                                                                                  | Dela endast siffra och pil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sensorvärde</li><li>2. Trendpil</li><li>3. Delares bild</li><li>4. Senast uppdaterad</li></ol> |  <p>The diagram shows a mobile app interface for sharing glucose data. It features a user profile icon labeled 'Max Nu' (3), a large glucose reading '7,5' with 'mmol/L' below it (1), a trend arrow pointing right (2), and a small icon indicating the last update (4).</p> |

## Nyckel

1. Sensorvärde
2. Trendpil
3. Delares bild
4. Senast uppdaterad
5. Trenddiagram
6. Avisering för hög nivå
7. Avisering för låg nivå
8. Tillbaka till instrumentpanelen
9. Delares namn
10. Aviseringsinställningar
11. Visade timmar
12. Vyer

## Trenddiagram

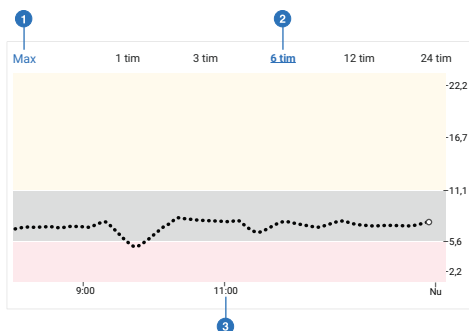


Vänd din smarta enhet åt sidan (liggande) för att se avläsningar av Delare under de senaste 24 timmarna. Rör och håll intryckt på diagrammet för att se detaljer.

## Nyckel

1. Tillbaka till stående vy
2. Vyer
3. Visade timmar

## Liggande vy av trenddiagram



## Aviseringsinställningar

Dina följare kan ställa in meddelanden. Till exempel, de kan ändra sina inställningar så att de får reda på när dina värden varit under 3,9 mmol/L längre än 30 minuter. De kan även ändra så att de får meddelande varje 2 timmar om du förblir under 3,9 mmol/L.

Följare ser när du stänger av Share, om de blivit borttagna eller om delningen avslutas av någon annan anledning. Följare kan trycka på den blå hjälpikonen bredvid en delare för mer information om deras status.

Om delaren inte får sensorglukosavläsningar visar Follow deras status som Aktiv – inga data. Följaren bör be delaren att kontrollera sin kontinuerliga glukosmätning.

Det finns tillfällen då Share-information inte är synkroniserad med din G6-information. Förlita dig alltid på din G6-app – inte dina följare – för att hantera din diabetes.

## 7.3 Kontrollera när larm/varningar ljuder

När du startar din smarta enhet visas Alltid ljud-ikonen. Du kan ändra hur Alltid ljud arbetar under **Inställningar > Larm**.

### Använda alltid ljud

När du är i skolan eller på arbetet kanske du vill att din telefons ljud ska vara mer diskret. Alltid ljud kombinerad med din telefons ljudlös/stör ej-inställning låter dig kontrollera när du hör ditt larm/varning och din telefons andra ljud. Ikoner på din hemskärm visar vad du vill höra.

Ljudlös/stör ej-inställningarna kontrollerar huruvida du hör ljud som spelas när du får meddelanden och samtal. När Alltid ljud är på hör du alltid förinställda och schemalagda varningar oavsett vad din telefons inställning för ljudlös/stör ej är. På natten kan du sätta på både Alltid ljud och Ljudlös/stör ej för att undvika att höra några ljud förutom dina G6-larm/varningar.

När Alltid ljud är på visas dessa ikoner på din hemskärm:



Förinställda larm (de du etablerade när du startade appen på din telefon eller i larm-menyn)



Schemalagda larm (beskrivna i nästa avsnitt)

När Alltid ljud är av spelar det roll huruvida din telefon är satt på ljudlös/stör ej.

- Om Ljudlös/stör ej också är av kommer du höra förinställda och schemalagda larm och se dessa ikoner på din hemskärm. Du hör även andra icke-G6 ljud från din telefon som samtal och meddelanden.



Förinställda larm



Schemalagda larm

- Men om ljud av/stör ej är aktiverat hör du bara dessa varningar: Glukos larm för akut lågt värde Sändarfel Sensorfel, och Appen stoppad. Du hör inga andra ljud från din telefon. Detta kan vara rätt inställningskombination för dig när du är i skolan eller på jobbet. Dessa ikoner på din hemskärm visar detta tillstånd:



Förinställda larm



Schemalagda larm

## 7.4 Larm Schema

Appens varningsschema låter dig välja hur dina larm/varningar meddelar dig vid olika tider olika dagar. Till exempel, du kan välja att schemalägga larm/varningar till att vara de enda ljud din smarta enhet tillåter när du sover.

Larmschema låter dig upprätta ett ytterligare schema.

### Använda larmschema

När du sätter på larmschemat för första gången kopieras dina förinställda inställningar för glukoslarm till ditt schema. Larmschemat vägleder dig i skapandet av ett ytterligare schema.

För att schemalägga larm/varningar till att vara de enda tillåtna ljuden när du sover, skapa ett nattlarmsschema med ljud Alltid på som i exemplet nedan. Därefter, varje natt, ändra din smarta enhet till Ljudlös/stör ej.

|                                                |                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">&lt; Inställningar</a> Notiser     |                                                                                   |
| SCHEMALAGD                                     |                                                                                   |
| Notis-schema                                   |  |
| Alltid ljud                                    |  |
| Namn                                           | Nätter >                                                                          |
| Tid                                            | 20:00 - 08:00 >                                                                   |
| Dagar                                          | Varje dag >                                                                       |
| Varning för akut lågt glukosvärde 3,1 mmol/L > |                                                                                   |
| Akut lågt glukosvärde inom kort                | på >                                                                              |
| Låg                                            | 4,4 mmol/L >                                                                      |
| Hög                                            | 11,1 mmol/L >                                                                     |
| Ökningshastighet                               | Av >                                                                              |
| Sänkningens hastighet                          | Av >                                                                              |

När larmschemat är på finns det två grupper inställningar i menyn över larm: förinställd och schemalagd.

- Förinställd visar dina vanliga icke-schemalagda inställningar
- Schemalagda visar alla varningar du ändrat från dina förinställda inställningar

Sidan är avsiktligt tom

# Bilaga

- Felsökning
  - Förläng din app
  - Dexcom Clarity
  - Ta hand om din G6
  - Förpackningssymboler
  - Garanti
  - Teknisk information
  - Instruktioner om professionell användning
  - Risker och fördelar
  - Ordlista
- 

# Bilaga A: Felsökning

Denna bilaga har kortfattade instruktioner för de vanligaste frågorna. De anges nedan:

A.1 Noggrannhet – G6-värden matchar inte blodsockervärdet som visas på mätaren

A.2 Noggrannhet – G6-värden matchar inte symptom

A.3 Självhäftande plåster

A.4 App avslutas

A.5 Kalibrera din G6

A.6 kan inte höra larm/varningar

A.7 Vanliga larm

- Uppmaningar om kalibrering och omkalibrering
- Larm om saknade värden
- Varning om förlorad signal
- Varning hos sändare
- Larm om låg batterinivå i sändare och senaste session
- Larm om ej hittad sändare

A.8 Avsluta sensorsession tidigt

A.9 Gap i diagram

A.10 Ladda mottagare

A.11 Starta sensorsession utan sensorkod

A.12 Vatten och G6

For full information om felsökning, se avsnittet med de vanligaste frågorna på Dexcoms webbsida (**dexcom.com**) eller kontakta din lokala Dexcom-representant.

Eventuella allvarliga incidenter som har inträffat i samband med denna enhet ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där du är etablerad.

## A.1 Noggrannhet – G6-värden matchar inte blodsockervärdet som visas på mätaren

Olika kroppsvätskor ger olika värden:

- BG-mätare mäter glukos från blod
- G6-sensor mäter glukos från interstitiell vätska

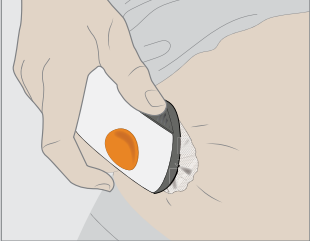
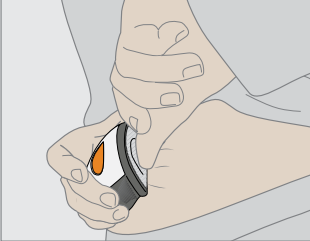
Kalibrering kan hjälpa matcha dina G6-värden med din mätares värden.  
(Se A.5 Kalibrera din G6.)

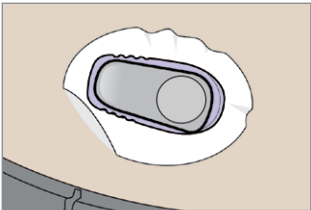
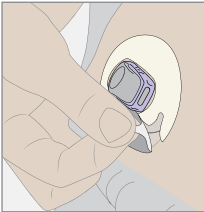
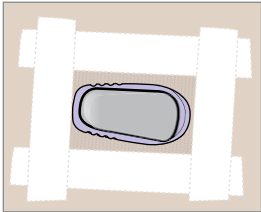
## A.2 Noggrannhet – G6-värden matchar inte symptom

Om dina värden inte matchar dina symptom:

- Tvätta dina händer med tvål och vatten. Torka dem. Ta därefter ett fingerstick med din mätare. Om värdet hos din mätare matchar dina symptom, använd det till att ta behandlingsbeslut.
- Kalibrering kan hjälpa matcha dina G6-värden med din mätares värden.  
(Se A.5 Kalibrera din G6.)

## A.3 Självhäftande plåster

| Problem                                                                                                                                             | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="107 205 352 229"><b>Applikator lossnar inte</b></p>  |  <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="451 496 912 554">1. Ta försiktigt bort det självhäftande plåstret på applikatorn.</li><li data-bbox="451 568 862 654">2. Kontrollera isättningsplatsen för att säkerställa att sensorn inte finns kvar i huden.</li><li data-bbox="451 668 767 696">3. Återanvänd inte applikatorn.</li><li data-bbox="451 711 905 732">4. Kontakta din lokala Dexcom-representant.</li></ol> |

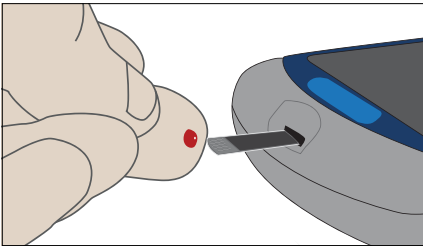
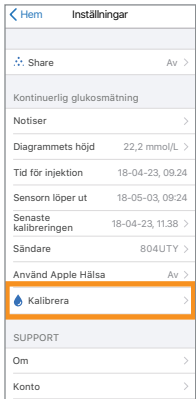
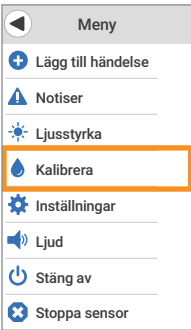
| Problem                                                                                                                             | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Flagning från självhäftande plåster</b></p>  | <p>Efter att din sensor är isatt kan du minska flagning genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sätta medicinsk tejp över det självhäftande plåstret. Täck inte över sändaren. Undvik öppna sår.</li> <li>• För att beställa plåster, kontakta din lokala Dexcom-representant.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Klisterlapp</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Medicinsk tejp</p> </div> </div> <p>För din nästa sensorsession kan du undvika flagning innan du sätter i sensorn genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Försäkra dig om att huden är ren och torr innan du sätter i sensorn.</li> <li>• Använda självhäftande produkter (som Mastisol®, SkinTac™) under plåster. Undvika platser där stick utförts.</li> <li>• Gnugga plåstret noggrant mot huden.</li> </ul> |
| <p><b>Hudirritation runt sensorplatsen</b></p>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vissa människor är känsliga för sensorlimmet. Kontakta din vårdgivare om du har betydande hudirritation, till exempel klåda, en brännande känsla och/eller utslag vid det självhäftande plåstret.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## A.4 App avslutas

Om appen stängs av kan det bero på att smart-enhetens minne eller lagringsutrymme är fullt. Du åtgärder detta genom att regelbundet stänga appar du inte använder och genom att ta bort filer du inte använder.

## A.5 Kalibrera din G6

Följ dessa steg för att Kalibrera din G6:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |                                                                                                                                                                        | Toka händerna efter att du har tvättat dem noggrant med tvål och vatten. Använd därefter din blodsockermätare till att få ett mätarvärde.         |
| 2. | <div><div><b>App</b></div><div></div></div> <div><b>Mottagare</b></div> <div></div> | <p>Tryck på <b>Kalibrera</b> i din G6-menyn.</p> <p>Följ instruktionerna på skärmen för att skriva in, spara och bekräfta din mätares värden.</p> |

Kalibrera endast i en displayenhet även om du använder både appen och mottagaren. Sändaren skickar kalibreringsinformation mellan varje.

Använd endast ditt mätarvärde för kalibreringar: skriv aldrig in värden från din G6. Kalibrera inte när ditt glukosvärde ändras snabbt – mer än 0,2 mmol/L per minut. Kalibrera endast med mätarvärden mellan 2,2 mmol/L och 22,2 mmol/L.

## A.6 kan inte höra larm/varningar

### Mottagare

Din mottagare piper, vibrerar och visar ett meddelande för varningar om akut lågt glukosvärde, snart akut lågt glukosvärde, sensorfel och sändarfel. För alla andra larm är din mottagare mer diskret. Vid larm/varning för första gången vibrerar den och visar ett meddelande. Om larm upprepar lägger mottagaren till ett pip.

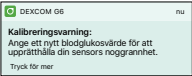
Om du inte kan höra dina larm på din app, kontrollera att appen, *Bluetooth*, volymen och meddelanden är på. Om du startar om din smarta enhet ska du öppna Dexcom-appen igen. Se G6-användarhandbok för rekommenderade inställningar för smart enhet.

Om du inte kan höra ditt larm/varning på din mottagare, ändra ringtonen för ditt larm/varning i **Meny > Ljud**. Använd **Meny > Ljud > Testa ljud** för att testa det valda ljudet för att säkerställa att du enkelt kan höra det.

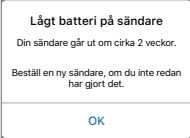
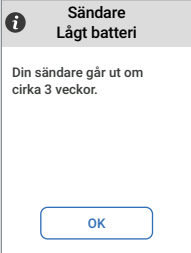
### App

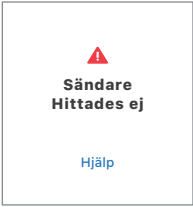
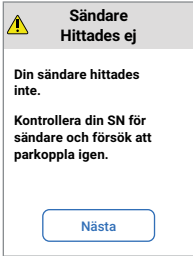
Om du inte kan höra dina larm på din app, kontrollera att appen, *Bluetooth*, volymen och meddelanden är påslagna. Om din smarta enhet är satt på Ljudlös/stör ej och du fortfarande vill motta kritiska larm/varningar, försäkra dig om att Alltid ljud är på. Se kapitel 2 för rekommenderade inställningar för smart enhet. Se produktanvisningar för din smarta enhet för att testa högtalaren.

## A.7 Vanliga larm

| Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lösning                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Uppmaningar om kalibrering och omkalibrering</b></p> <p>G6 behöver kalibreras.</p> <p><b>App</b></p>  <p><b>Kalibreringsfel</b><br/>Efter 15 minuter, ange ett nytt blodglukosvärde för att omkalibrera din sensor.</p> <p>OK</p> <p><b>Mottagare</b></p>  <p><b>Kalibrering Meddelande</b></p> <p>Ange ett nytt blodglukosvärde för att upprätthålla din sensors noggrannhet.</p> <p>Kalibrera</p> <p>Avvisa</p>  <p><b>Omkalibrering Meddelande</b></p> <p>Efter 03:19, ange ett nytt blodglukosvärde för att omkalibrera din sensor.</p> <p>OK</p> | <p>G6 uppmanar dig att kalibrera igen när du angav en kalibrering utanför det förväntade intervallet.</p> |

| Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Larm om saknade värden</b></p> <p>Sensorn kan för tillfället inte mäta glukos.</p> <div data-bbox="128 272 324 415"> <p><b>App</b></p> <p>Inga notiser om avläsningar</p> <p>Du kommer inte att få notiser, varningar eller resultat från glukosmätningar från sensorn.</p> <p>OK</p> </div> <div data-bbox="362 272 558 561"> <p><b>Mottagare</b></p> <p> <b>Inga avläsningar Meddelande</b></p> <p>Du kommer inte att få notiser, varningar eller resultat från glukosmätningar från sensorn.</p> <p>Vänta ...</p> <p>OK</p> </div> | <p>Kalibrera inte.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera sändare; är den placerad i hållaren?</li> <li>2. Vänta upp till 3 timmar medan G6 åtgärdar sig själv.</li> <li>3. Om inte korrigerad efter 3 timmar, kontakta din lokala Dexcom-representant.</li> </ol> <p>Inget larm/varning eller G6-värde förrän åtgärdat. Använd din mätare till att ta behandlingsbeslut.</p> <p><b>Endast app:</b></p> <p>Tryck på <b>OK</b> för att rensa larm, därefter på <b>Hjälp</b> på hemskärmen för mer information.</p>        |
| <p><b>Förlorad signal</b></p> <p>Displayenhet och sändare kommunicerar inte.</p> <div data-bbox="128 829 324 932"> <p><b>App</b></p> <p>Varning för tappad signal</p> <p>Du kommer inte att få notiser, varningar eller resultat från glukosmätningar från sensorn.</p> <p>OK</p> </div> <div data-bbox="362 829 558 1080"> <p><b>Mottagare</b></p> <p> <b>Tappad signal Meddelande</b></p> <p>Du kommer inte att få notiser, varningar eller resultat från glukosmätningar från sensorn.</p> <p>OK</p> </div>                              | <p>Kalibrera inte.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifiera att displayenhet och sändare är inom 6 meters avstånd från varandra utan hinder emellan. Om du är i vatten, håll enheten närmare än 6 meter.</li> <li>2. Vänta upp till 30 minuter.</li> <li>3. Om inte korrigerad, kontakta din lokala Dexcom-representant.</li> </ol> <p>Inget larm/varning eller G6-värde förrän åtgärdat. Använd din mätare till att ta behandlingsbeslut.</p> <p><b>Endast app:</b></p> <p>Stäng av <i>Bluetooth</i>, sätt därefter på.</p> |

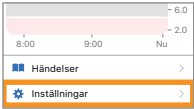
| Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Varning hos sändare</b></p> <p>Sändaren fungerar inte. Sensorsessionen har stoppats automatiskt.</p> <div data-bbox="96 258 298 596"> <p><b>App</b></p>  </div> <div data-bbox="330 258 533 561"> <p><b>Mottagare</b></p>  </div>           | <p>Kontakta din lokala Dexcom-representant.</p> <p>Inget larm/varning eller G6-värde förrän ersatt. Använd din mätare till att ta behandlingsbeslut.</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Larm om låg batterinivå i sändare och senaste session</b></p> <p>Batteri hos sändare på väg att ta slut.</p> <div data-bbox="96 736 298 922"> <p><b>App</b></p>  </div> <div data-bbox="330 736 533 1036"> <p><b>Mottagare</b></p>  </div> | <p>Beställ ny sändare.</p> <p>När batteriet hos din sändare är på väg att ta slut berättar G6 när det:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Har 3 veckor kvar</li> <li>• Har 2 veckor kvar (se skärmbild till vänster)</li> <li>• Har 1 session kvar</li> <li>• Är för låg för en till session</li> <li>• Är kritisk låg och måste ersättas omedelbart</li> </ul> |

| Problem                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Larm om ej hittad sändare</b><br/>G6 parkopplade inte.</p> <p><b>App</b></p>  <p><b>Mottagare</b></p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Försäkra dig om att sändaren sitter i hållaren.</li> <li>2. Kontrollera att sändarens serienummer (SN) är korrekt angett.</li> <li>3. Om problemet inte löst kanske sensorn inte är isatt korrekt. Sätt i en ny sensor. För en ersättningssändare, kontakta din lokala Dexcom-representant.</li> </ol> <p>Inget larm/varning eller G6-värde förrän åtgärdat. Använd din mätare till att ta behandlingsbeslut.</p> |

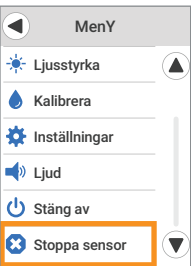
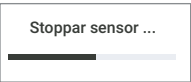
## A.8 Avsluta sensorsession tidigt

Du kanske vill avsluta din sensorsession tidigt. Om så är fallet, avsluta den i endera appen eller mottagaren. Båda metoderna visas nedan. När du väl stoppat din sensorsession kommer du inte kunna starta om den.

### App: avsluta sensorsession tidigt

|    |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>Apple</b></p>  | <p><b>Android</b></p>  | Tryck på <b>Inställningar</b> .                                                   |
| 2. |                    |                                                                                                         | Tryck på <b>Stoppa sensor</b> .<br>Ta bort sändare och sensor.<br>(Se kapitel 6.) |

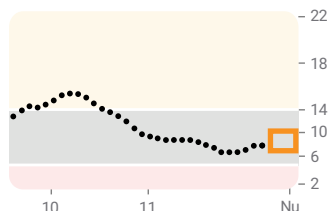
## Mottagare: avsluta session tidigt

|    |                                                                                   |                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. |  | Tryck på <b>Meny</b> .                                              |
| 2. |  | Tryck på <b>Stoppa sensor</b> .                                     |
| 3. |  | Tryck på <b>Ja</b> .<br>Ta bort sändare och sensor. (Se kapitel 6.) |
| 4. |  | Vänta.                                                              |

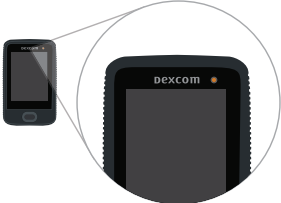
## A.9 Gap i diagram

När du inte får G6-värden kan ditt diagram visa ett gap på höger sida i trendprickarna. I exemplet kan du se gapet där dina nuvarande prickar borde vara:

När dina G6-värden återupptas kan upp till 3 timmars missade G6-värden fyllas i diagrammet.



## A.10 Ladda mottagare

| Problem                                                                                                                                                                                 | Lösning                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ljuset för laddning är på eller så vill mottagaren inte starta</p> <p>Mottagare behöver laddas</p>  |  <ul style="list-style-type: none"><li>• Ladda mottagare med hjälp av eluttag, inte via dator/laptop</li><li>• Full laddning kan ta upp till 3 timmar</li></ul> |

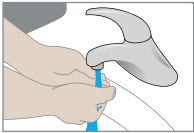
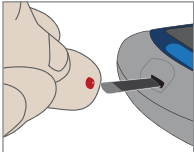
## A.11 Starta sensorsession utan sensorkod

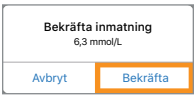
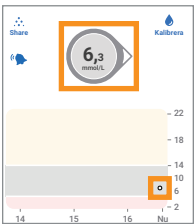
Vill du starta en sensorsession men saknar sensorkoden? Sensorkoden finns på applikatorns självhäftande baksida. Använd endast sensorkoden från den applikator du sätter i; använd inte andra koder. Den rätta sensorkoden gör att G6 fungerar utan uppmaning om kalibrering varje dag.

Även om du inte har en sensorkod kan du fortfarande använda sensorn. Under din sensor-session kommer du uppmanas att kalibrera dagligen. (Se Uppmaning om kalibrering i avsnitt A.7 Vanliga larm.)

Följ uppmaningarna om inställning utan sensorkod.

## App: inställning utan sensorkod

|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |                      | <p>Vid inställning av app eller isättning av ny sensor utan användning av en sensorkod, på skärmen för sensorkod, tryck på <b>Ingen kod</b>.</p> <p>Om du inte anger en sensorkod kommer du bli tvungen att kalibrera din G6 dagligen under denna sensor-session. Använd endast sensorkoden från den applikator du sätter i.</p> <p>Följ instruktionerna på de kommande skärmarna (inte inkluderade i dessa steg) för att:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skriva in sändares SN (om du använder en ny sändare).</li><li>• Sätt i sensor.</li><li>• Fäst sändare.</li></ul> |
| 2. |                      | <p>Tryck på <b>Starta sensor</b>.</p> <p>Vänta 2 timmar på din sensor att slutföra uppvärmningen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | <br><b>Kalibrera</b> | <p>Efter att sensorn värmts upp kommer din G6 uppmana dig att kalibrera två gånger via två separata fingerstick.</p> <p>Starta genom att trycka på kalibreringsikonen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. |                     | <p>Tvätta dina händer med tvål och vatten, inte handsprit.</p> <p>Torka dina händer.</p> <p>Att tvätta och torka dina händer innan du tar ett mätarvärde hjälper till att säkerställa noggrannheten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. |                    | <p>Ta ett fingerstick BG-mått med hjälp av din mätare. Endast fingertoppen, aldrig någon annan plats.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. |                   | <p>Skriv in exakt BG-nummer från din mätare inom 5 minuter efter att ha tagit ett fingerstick eller snabbare om ditt glukosvärde ändras snabbt.</p>   |
| 7. |                   | <p>Tryck på <b>Bekräfta</b> för att spara.</p>                                                                                                        |
| 8. |  <p>Kalibrera</p> | <p>Dags för din nästa kalibrering.<br/>Tryck på <b>Kalibrera</b>.<br/>Upprepa steg 4–8 och skriv in det andra fingersticket.</p>                      |
| 9. |                   | <p>Titta efter ditt första G6-värde fem minuter efter att ha skrivit in din andra kalibrering!<br/>Varje prick är ett G6-värde taget var 5 minut.</p> |

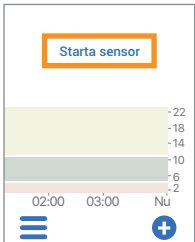
Tolv timmar senare påminner den dig om att kalibrera igen. Därefter efter ytterligare tolv timmar får du en till påminnelse. För resten av din sensorsession uppmanar G6 dig att kalibrera en gång varje 24 timmar.

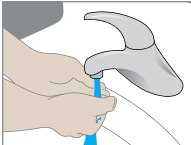
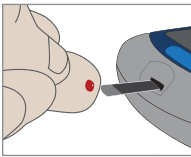


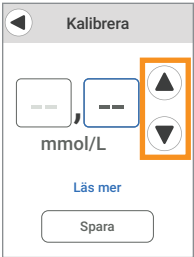
Var noggrann med att kalibrera vid uppmaning. Försäkra dig om att du tvättar dina händer noggrant innan du tar ett fingerstick. Om inte kanske dina G6-värden inte stämmer överens med din mätare. Med andra ord: vänta inte – kalibrera!

Om du använder appen och mottagaren, skriv bara in din kalibrering en gång. Om mindre än 10 minuter kommer sändaren att skicka informationen till den andra enheten.

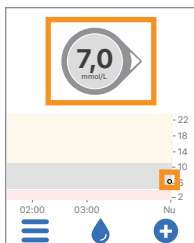
## Mottagare: ställ in utan sensorkod

|    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |   | <p>Vid inställning av mottagare eller isättning av en ny sensor utan användning av sensorkod, på skärmen för sensorkod, tryck på <b>Ingen kod</b>.</p> <p>Om du inte anger en sensorkod kommer du bli tvungen att kalibrera din G6 dagligen under denna sensorsession. Använd endast sensorkoden från den applikator du sätter i.</p> <p>Följ instruktionerna på de kommande skärmarna (inte inkluderade i dessa steg) för att:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skriva in sändares SN (om du använder en ny sändare).</li><li>• Sätt i sensor.</li><li>• Fäst sändare.</li></ul> |
| 2. |  | <p>Tryck på <b>Starta sensor</b>.</p> <p>Vänta på att sensorns 2 timmar uppvärmning avslutas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | <div data-bbox="200 111 391 361"> <p><b>Kalibrering</b><br/><b>Meddelande</b></p> <p>Ange ett nytt blodglukosvärde för att upprätthålla din sensors noggrannhet.</p>  <p><b>Kalibrera</b></p> <p>Avvisa</p> </div> | <p>Efter din sensors uppvärmning kommer G6 uppmana dig att kalibrera två gånger med hjälp av två separata fingerstick.</p> <p>Tryck på <b>OK</b> för att kalibrera.</p>                                  |
| 4. |                                                                                                                                                                                                                    | <p>Tvätta dina händer med tvål och vatten, inte handsprit.</p> <p>Torka dina händer.</p> <p>Att tvätta och torka dina händer innan du tar ett mätarvärde hjälper till att säkerställa noggrannheten.</p> |
| 5. |                                                                                                                                                                                                                    | <p>Ta ett fingerstick BG-mått med hjälp av din mätare. Endast fingertoppen, aldrig någon annan plats.</p>                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. |  <p>Kalibrera</p> <p>mmol/L</p> <p>Läs mer</p> <p>Spara</p>                                                                                       | <p>Skriv in exakt BG-nummer från din mätare inom 5 minuter efter att ta tagit ett fingerstick.</p> <p>Tryck på upp- och nedpilar för att skriva in ett värde.</p> <p>Tryck därefter på <b>Spara</b>.</p> |
| 7. |  <p>Stämmer det här?</p> <p>7,0<br/>mmol/L<br/>3:08</p> <p>Nej</p> <p>Ja</p>                                                                      | <p>Tryck på <b>Ja</b> för att bekräfta att du skrivit in rätt värde.</p>                                                                                                                                 |
| 8. |  <p>Kalibrering Meddelande</p> <p>Ange ett nytt blodglukosvärde för att upprätthålla din sensors noggrannhet.</p> <p>Kalibrera</p> <p>Avvisa</p> | <p>Dags för din nästa kalibrering.</p> <p>Tryck på <b>OK</b>.</p> <p>Upprepa steg 4–8 och skriv in det andra fingersticket.</p>                                                                          |

9.



Titta efter ditt första G6-värde fem minuter efter att ha skrivit in din andra kalibrering!

Varje prick är ett G6-värde taget var 5 minut.

Tolv timmar senare påminner den dig om att kalibrera igen. Därefter efter ytterligare tolv timmar får du en till påminnelse. För resten av din sensor-session uppmanar G6 dig att kalibrera en gång varje 24 timmar.

Var noggrann med att kalibrera vid uppmaning. Försäkra dig om att du tvättar dina händer noggrant innan du tar ett fingerstick. Om inte kanske dina G6-värden inte stämmer överens med din mätare. Med andra ord: vänta inte – kalibrera!



Om du använder appen och mottagaren, skriv bara in din kalibrering en gång. Om mindre än 10 minuter kommer sändaren att skicka informationen till den andra enheten.

## A.12 Vatten och G6

När den har fästs på plats är sändaren vattentät, men inte mottagaren. Du kan simma, duscha och bada utan att behöva oroa dig för vatten i din G6 – se bara till att ha din mottagare på en torr plats.

Om du är i vatten behöver din displayenhet vara inom 6 meters avstånd för att motta G6-värden.

# Bilaga B: Förläng din app

Med appen Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring System (G6) ser du meddelanden på din låsskärm eller smartklocka.

Ser du inte några uppgifter? Öppna din app.

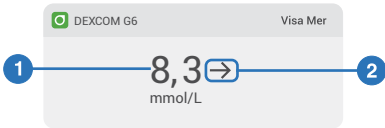
Om du har en smart-enhet från Apple kan du ställa in Siri till att läsa upp ditt G6-värde när du frågar.

Använder du hälsoappar? Dela din glukosinformation med dem för en mer fullständig bild.

## B.1 Dagvy (Apple)

Kontrollera din CGM-information i dagvyn även när din smarta enhet är låst. Från vänstra kanten av din hemskärm eller låsskärm, svep åt höger.

För att lägga till G6, skrolla ner till botten och tryck på Redigera. Se instruktionerna för din smarta enhet för detaljer.

| Nyckel                                               | Idag, visa                                                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Siffror och pil</b><br>1. G6-värde<br>2. Trendpil |  |

Tryck på **Visa mer** för att visa diagram.

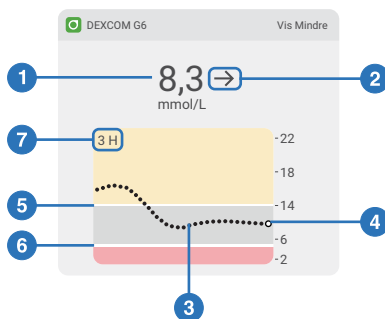
## Nyckel

### Siffra och pil

1. G6-värde
2. Trendpil

### Diagram

3. Trenddiagram
4. Nuvarande G6-värde
5. Larm om högt värde
6. Larm om lågt värde
7. Visar de senaste 3 timmarna



## B.2 Snabb titt (Android)

Kontrollera din G6 på din låsskärm eller svep nedåt från toppen.

### Snabb titt



Dra nedåt på den nedre kanten av Snabb titt för att visa ditt diagram.

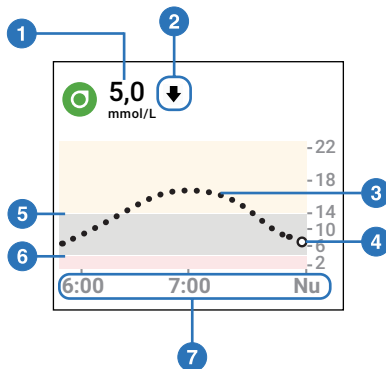
### Nyckel

#### Siffra och pil

1. G6-värde
2. Trendpil

#### Diagram

3. Trenddiagram
4. Nuvarande G6-värde
5. Larm om högt värde
6. Larm om lågt värde
7. Visar de senaste 3 timmarna



Snabb titt är förinställt påslagen. Stäng av den i appen: **Inställningar > Snabb titt**

## B.3 Smartklocka

Kontrollera din G6 i din Apple eller Android smartklocka.

### Föreslagen användning

Använda en smartklocka med din G6 kan ändra hur du får larm/varningar.

- Din smartklocka kommunicerar endast med din smarta enhet, inte sändaren.
- Du kommer inte få larm/varningar eller G6-värden på din klocka så länge den inte är ansluten till din smarta enhet.

Försäkra dig om att du förstår hur du får meddelanden när en klocka är ansluten.

- Du måste bära klockan för att motta larm och känna vibrationer.
- Bland inställningarna för din smarta enhet, försäkra dig om att meddelanden skickas till både din smarta enhet och klocka.
- Inaktivera eller blockera inte meddelanden från appen.

Väcka din klocka uppdaterar dina GCM-data från din smarta enhet. Det kan ske en liten fördröjning innan appen i din klocka visar nuvarande information.

Gå till **[dexcom.com/compatibility](https://dexcom.com/compatibility)** för att säkerställa att din klocka fungerar med din G6.

### Inställning av din Apple-klocka (iPhone)

Använd klock-appen hos din iPhone för att installera appen.

Se instruktionerna för din klocka för detaljer om installation av appar.

### Inställning av Android Wear

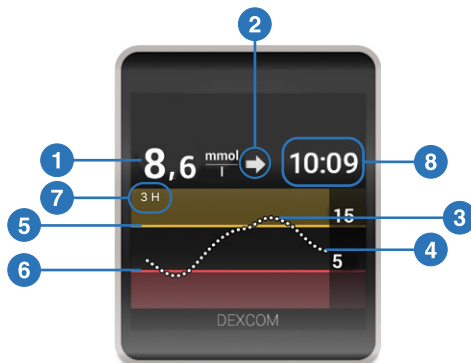
Använda Dexcom G6 klock-layout, kontrollera din G6-information. Se instruktionerna för din klocka för mer information.

**Siffra och pil**

1. G6-värde
2. Trendpil

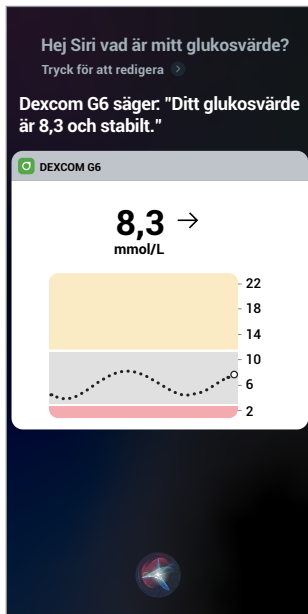
**Diagram**

3. Trenddiagram
4. Nuvarande G6-värde
5. Larm om högt värde
6. Larm om lågt värde
7. Visar de senaste 3 timmarna
8. Tid

**Android Wear**

## B.4 Siri (Apple)

Använd dina appinställningar för att ställa in en Siri-genväg. Sedan kan du be Siri att läsa upp dina G6-värden och trender när din app körs. När Siri svarar visas ditt diagram på låsskärmen.



Siri kanske inte finns i alla länder. Kontrollera Apples webbplats för att se om Siri är tillgänglig i ditt land.

## B.5 Hälsoappar

Skicka din glukosinformation till hälsoappar.

Gå till **Inställningar > Hälsoappar** för att börja.

När du har konfigurerat hälsoappen skickas de senaste 30 dagarnas glukosinformation till hälsoappen, förutom de senaste tre timmarna.

Sedan skickas all ny glukosinformation med en 3-timmars försening.

|                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <a href="#">&lt; Hem</a>                                                                    | Inställningar       |
|  Share     | På >                |
| CGM                                                                                         |                     |
| Notiser                                                                                     | >                   |
| Diagrammets höjd                                                                            | 22 mmol/L >         |
| Tid för injektion                                                                           | Ingen sensor införd |
| Sensorn går ut                                                                              | Ingen sensor införd |
| Senaste kalibrering                                                                         | Inget               |
| Sändare                                                                                     | 8J57WY >            |
| Använd Apple Health                                                                         | På >                |
| Använd Siri-genvägar                                                                        | >                   |
|  Kalibrera | >                   |
| SUPPORT                                                                                     |                     |
| Om                                                                                          | >                   |
| Konto                                                                                       | >                   |
| Kontakt                                                                                     | >                   |
| Hjälp                                                                                       | >                   |
| <a href="#">Stoppa sensor</a>                                                               |                     |
| Se Hjälp för instruktioner om avlägsnande av sensorer.                                      |                     |

# Bilaga C: Dexcom Clarity

Dexcom Clarity programvara är en viktig del av ditt Dexcom CGM-system.

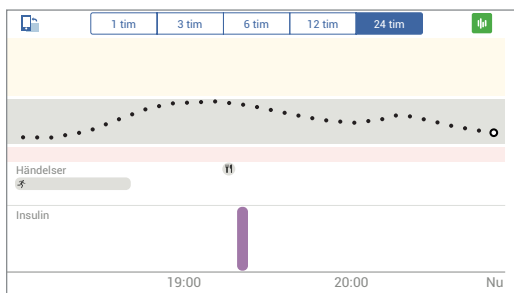


Clarity understryker dina glukosmönster, trender och statistik. Dela Clarity med din klinik och övervaka förbättringar mellan besök.

Du kan komma åt Clarity från Dexcom G6-appen eller på internet. Så här når du Dexcom Clarity:

- **Från din Dexcom G6-app:** Tryck på Clarity-ikonen på din händelseskärm eller när du vänder din smarta enhet till liggande för att se dina händelser.
- **På internet:** Logga in på [clarity.dexcom.eu](https://clarity.dexcom.eu). Använd ditt nuvarande Dexcom-login eller skapa ett konto.

Dexcom Clarity kanske inte finns tillgängligt i alla regioner.



| Hem                                                                                 | Händelser                                        | Redigera |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| <div>+ Lägg till händelse</div>                                                     |                                                  |          |
| Tillagda händelser visas nedan.                                                     |                                                  |          |
| IDAG                                                                                |                                                  |          |
|    | Kolhydrater<br>30 g<br>8:30                      |          |
|    | Träning<br>Kör<br>8:00 • 1 timmes varaktighet    |          |
| IGÅR                                                                                |                                                  |          |
|   | Kolhydrater<br>30 g<br>8:30                      |          |
|  | Träning<br>Kör<br>8:00 • 1 timmes varaktighet    |          |
|  | Tidigare händelser kan även ses i Dexcom Clarity |          |

# Bilaga D: Ta hand om din G6

## D.1 G6 Underhåll

### Sändare

- Förvara i lådan fram tills användning. Kontrollera sändaren och använd inte om skadad.
- Förvara mellan 0°C och 45°C.

### Mottagare

- Kontrollera mottagarens utsida. Om sprucken eller skadad, använd inte för annars kan du få en elektrisk stöt. Öppna inte höljet.
- Använd det medföljande fodralet till att skydda mottagaren från stötar och slag. När du sätter på fodralet, försäkra dig om att hålen för högtalaren är korrekt placerade.
- Håll batteriet laddat. Använd endast Dexcom USB-kabel för laddning/nedladdning.
- För att torka av mottagaren, använd en ren torr trasa.
  - Använd inte en sträv trasa, handduk, servett eller liknande föremål.
  - Få inte in fukt i någon öppning.
  - Använd inte aerosolsprej, lösningsmedel eller slipmedel.

## Alla G6-komponenter

- För att din G6 ska fortsätta fungera korrekt, byt inte ut några G6-komponenter.

## D.2 Förvaring

Att förvara din G6 korrekt hjälper till att undvika systemfel.

### Sensor

- Behåll den i dess sterila förpackning tills du är redo att använda den.
- Förvara vid en temperatur mellan 2°C och 30°C.

## Sändare

- Håll skyddad när den inte används
- Förvara vid en temperatur mellan 0°C och 45°C
- Förvara mellan 10 % och 95 % relativ luftfuktighet

## Mottagare

- Håll skyddad när den inte används
- Ladda batteriet helt innan förvaring längre än 3 månader
- Förvara vid en temperatur mellan 0°C och 40°C
- Förvara mellan 10 % och 95 % relativ luftfuktighet

## D.3 Bortskaffande av system

Olika platser har olika krav för bortskaffande av elektronik (mottagare och sändare) och delar som kommit i kontakt med blod eller andra kroppsvätskor (sensor). Följ din plats lokala krav på avfallshantering.

# Bilaga E: Förpackningssymboler

Symboler finns på sensor, sändare och mottagarens förpackning. De visar korrekt och säker användning av G6. För beskrivning av symboler, se tabellen nedan eller [dexcom.com/symbols](http://dexcom.com/symbols).

Vissa av dessa symboler kanske inte har betydelse i din region och är endast listade i informationssyfte. Denna tabell visar vad varje symbol betyder:



Ansvarig person i Storbritannien



Använd ej om förpackningen är skadad



Apotek



Återanvänd ej



Auktoriserad representant för Schweiz



Auktoriserad representant inom den Europeiska gemenskapen



Australiens och Nya Zeelands regelefterlevnadsmärke (RCM) gällande elektromagnetisk kompatibilitet (ECM)



Avfall av elektrisk och elektronisk utrustning – Följ lokala föreskrifter för korrekt omhändertagande.



Avfallscontainer elektroniskt genomträngande avfall



Avfallscontainer genomträngande föremål



Bluetooth är på, parkoppling möjlig



CE-märkning om överensstämmelse



Delnummer



Elektroniskt genomträngande avfall



Endast för inomhusbruk



Enkelt sterilt barriärsystem med skyddande förpackning utanför



Fara: Genomträngade föremål



French Triman-logotyp: Återvinn och avfallshantera separat



Gräns för luftfuktighet



Håll borta från värme



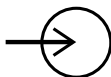
Håll torr



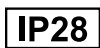
Importör



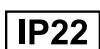
Indikerar att föremålet är en medicinteknisk produkt



Inström



Kapslingens skyddsnivå mot främmande föremål  
> 12,5 mm diameter, nedsänkt i vatten



Kapslingens skyddsnivå mot främmande föremål  
> 12,5 mm diameter, vattendroppar (15° vinkel)



Katalognummer



Likström



New Zealand Radio Compliance



Osäker vid MR (Magnetisk resonanstomografi)



Parti-/serienummer



Se bruksanvisningarna



Serienummer



Sista förbrukningsdag



Steriliserad med strålning



Temperaturgräns



Tillverkare



Tillverkningsdatum



Typ BF tilläpplad artikel



UK-märkning om överensstämmelse



Unik enhetsidentifierare



Utrustning klass II



Växelström



Varning, se bruksanvisningarna

# Bilaga F: Garanti

Ibland händer saker. Dexcom ser till att du är skyddad!

Denna bilaga handlar om vår garantiinformation och går igenom vad vi ersätter och hur länge.

## F.1 Garanti hos Dexcom-mottagare

### Vad ersätts och hur länge?

Dexcom, Inc. ("Dexcom") erbjuder en garanti till kunden ("du" eller "kunden") om att Dexcoms mottagare ("mottagare") är fri från defekter vid normal användning ("garanti") under den period som startar från och med införskaffningen och sträcker sig (1) år därefter.

Obs! Om du mottar denna mottagare som ersättning för en annan mottagare kommer garantin för den nya mottagaren att fortsätta under den kvarvarande garantiperioden från den första, ersättningen är inte föremål för någon annan garanti.

### Vad ersätts inte?

Denna garanti är baserad på att kunden använder det kontinuerliga glukosövervakningssystemet korrekt i enlighet med den dokumentation som levereras av Dexcom. Du har annars inte tillåtelse att använda det kontinuerliga glukosövervakningssystemet. Felaktig användning av det kontinuerliga glukosövervakningssystemet, felaktig åtkomst av det eller den information den behandlar och överför, olaglig uppläsning av ditt kontinuerliga glukosövervakningssystem eller mobiltelefon, inklusive andra icke-auktoriserade handlingar kan utsätta dig för risk, kan orsaka det kontinuerliga glukosövervakningssystemet att fungera felaktigt, är inte tillåtet och ogiltigförklarar din garanti.

### *Denna garanti täcker inte:*

- Defekter eller skador orsakade av olycksfall, felaktig användning, missbruk, försumelse, onaturliga fysiska-, elektriska- eller elektromagnetiska påfrestningar, modifiering av någon del hos produkten eller kosmetisk skada.
- Utrustning med serienumret borttaget eller gjort oläsbart.

- Alla ytor och andra extern exponerade ytor hos delar som är repade eller skadade som ett resultat av normal användning.
- Tekniska fel som uppstått som ett resultat av användning av mottagaren i kombination med tillbehör, anknutna produkter och kringutrustning, oavsett hårdvara eller mjukvara, som inte är tillhandahållen eller godkänd av Dexcom.
- Defekter eller skador från otillbörlig testning, drift, underhåll, installation eller justering.
- Installation, underhåll och service av produkter eller tjänster andra än CGM-system (vilka kan vara föremål för en annan separat garanti), oavsett om levererad av Dexcom eller någon annan part; detta inkluderar din mobiltelefon eller smarta enhet och din anslutning till internet.
- En mottagare som plockats isär eller fått någon av sin mjukvara återkommen på ett icke-auktoriserat sätt.
- Vattenskada på mottagaren.
  - Mottagaren är inte vattentät.
  - Blöt aldrig någonsin ner mottagaren.

## Dexcoms skyldigheter under garantin

Under garantiperioden kommer Dexcom att ersätta, utan extra kostnad för köparen, alla mottagare med defekter.

För att få hjälp med en defekt mottagare, kontakta din lokala Dexcom-representant.

## Begränsningar hos Dexcoms garanti och ansvarsskyldigheter

Garantin beskriven ovan är den exklusiva garantin för mottagaren, istället för alla andra garantier, uttryckta eller antydda, ändra i fakta eller genom lagstiftning, lagstadga eller på annat sätt.

Dexcom uttryckligen exkluderar och förnekar alla andra garantier, uttryckta eller antydda, inklusive utan begränsningar alla garantier av god handelskvalité, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång, förutom i den utsträckning tillåtet av rådande lagstiftning.

Dexcom ska inte hållas ansvarig för olyckshändelser, konsekvenser, eller speciell indirekt skada oavsett hur orsakad och under vilka teorier om ansvar uppstådda utanför köpet, användningen, felaktiga användningen eller oförmåga att använda någon Dexcom G6 eller någon annan funktion eller tjänst tillhandahållen av Dexcom för användning tillsammans med Dexcom G6.

Dessa begränsningar hos Dexcoms garanti och ansvarsskyldighet gäller även om Dexcom, eller dess agenter, har fått råd gällande sådana skador och fel av väsentligt syfte av denna garanti och den begränsade ersättningen tillhandahållen från Dexcom.

Denna garanti är endast levererad till originalköparen och kan inte överföras till någon annan, och den konstaterar köparens exklusiva ersättning.

Om någon del av denna garanti är olaglig eller ogenomförbar av någon anledning på grund av lagstiftning ska detta inte påverka genomdrivbarheten av resten av denna garanti. Denna garanti kommer genomdrivas så långt som tillåtet av lagstiftning.

## F.2 Garanti hos Dexcom-sändare

### Vad ersätts och hur länge?

Dexcom, Inc. ("Dexcom") levererar en begränsad garanti till originalköparen ("dig" eller "köpare") om att Dexcom G6-sändare ("sändaren") är fri från defekter vid normal användning ("garanti") under den period som startar det datum varan levereras till köparen och går ut tre (3) månader därefter.

Obs: om du mottar denna sändare som ersättning för en annan sändare ska garantin för ersättningssändaren fortsätta under den tid som kvarstår av garantiperioden hos den första sändaren, men ersättningssändaren är inte föremål för någon annan garanti.

### Vad ersätts inte?

Denna garanti är baserad på att köparen på ett korrekt sätt använder det kontinuerliga glukosövervakningssystemet i tid och i enlighet med den dokumentation som levererats av Dexcom. Du har annars inte tillåtelse att använda det kontinuerliga glukosövervakningssystemet. Felaktig användning av det kontinuerliga glukosövervakningssystemet, felaktig åtkomst av det eller den information den behandlar och överför, olaglig uppläsning av ditt kontinuerliga glukosövervakningssystem eller mobiltelefon, inklusive andra icke-auktoriserade handlingar kan utsätta dig för risk, kan orsaka det kontinuerliga glukosövervakningssystemet att fungera felaktigt, är inte tillåtet och ogiltigförklarar din garanti.

### *Denna garanti täcker inte:*

- Defekter eller skador orsakade av olycksfall, felaktig användning, missbruk, försummelse, onaturliga fysiska-, elektriska- eller elektromagnetiska påfrestningar, modifiering av någon del hos produkten eller kosmetisk skada.
- Utrustning med serienumret borttaget eller gjort oläsbart.
- Alla ytor och andra extern exponerade ytor hos delar som är repade eller skadade som ett resultat av normal användning.
- Tekniska fel som uppstått som ett resultat av användning av mottagaren i kombination med tillbehör, anknutna produkter och kringutrustning, oavsett om hårdvara eller mjukvara, som inte är tillhandahållen eller godkänd av Dexcom.
- Defekter eller skador från otillbörlig testning, drift, underhåll, installation eller justering.
- Installation, underhåll och service av produkter eller tjänster andra än det kontinuerliga glukosövervakningssystemet (vilka kan vara föremål för en annan separat garanti), oavsett om levererad av Dexcom eller någon annan part; detta inkluderar din mobiltelefon eller smarta enhet och din anslutning till internet.
- En mottagare som plockats isär eller fått någon av sin mjukvara åtkommen på ett icke-auktoriserat sätt.
- Vattenskada på sändare.
- Bortom specifikationer listade i Dexcom G6 Att använda din G6 handbok.

## **Dexcoms skyldigheter under garantin**

Under garantiperioden kommer Dexcom ersätta, utan extra kostnad för köparen, alla sändare med defekter.

För att få hjälp med en defekt sändare, kontakta din lokala Dexcom-representant.

## **Begränsningar hos Dexcoms garanti och ansvarsskyldigheter**

Garantin beskriven ovan är den exklusiva garantin för sändaren, istället för alla andra garantier, uttryckta eller antydda, ändra i fakta eller genom lag, lagstadga eller annat sätt.

Dexcom uttryckligen exkluderar och förnekar alla andra garantier, uttryckta eller antydda, inklusive utan begränsningar alla garantier av god handelskvalité, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång, förutom i den utsträckning tillåtet av rådande lagstiftning.

Dexcom ska inte hållas ansvarig för olyckshändelser, konsekvenser, eller speciell indirekt skada oavsett hur orsakad och under vilka teorier om ansvar uppstådda utanför köpet, användningen, felaktiga användningen eller oförmåga att använda någon Dexcom G6 eller någon annan funktion eller tjänst tillhandahållen av Dexcom för användning tillsammans med Dexcom G6.

Dessa begränsningar hos Dexcoms garanti och ansvarsskyldighet gäller även om Dexcom, eller dess agenter, har fått råd gällande sådana skador och fel av väsentligt syfte av denna garanti och den begränsade ersättningen tillhandahållen från Dexcom.

Denna garanti är endast levererad till originalköparen och kan inte överföras till någon annan, och den konstaterar köparens exklusive ersättning.

Om någon del av denna garanti är olaglig eller ogenomförbar av någon anledning på grund av lagstiftning ska detta inte påverka genomdrivbarheten av resten av denna garanti. Denna garanti kommer genomdrivas så långt som tillåtet av lagstiftning.

# Bilaga G: Teknisk information

## G.1 Sammanfattning av prestanda hos enheten

När LÄGRE är bättre

| Vuxna                                                                              | Resultatindikatorer*                                                                                                                                                | Pediatrik                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 9,8 %                                                                              | <b>Övergripande noggrannhet</b><br><b>Medel ARD% (MARD),</b><br><b>2,22–22,22 mmol/L</b><br><br>(% genomsnittligt absolut fel kontra referens av alla glukosvärden) | 7,7 %                                                                            |
| Dag 1: 8,6 %<br>Dag 2: 8,7 %<br>Dag 4–5: 10,7 %<br>Dag 7: 10,6 %<br>Dag 10: 10,6 % | <b>Noggrannhet med tiden</b><br><b>Medel ARD% (MARD),</b><br><b>2,22–22,22 mmol/L</b>                                                                               | Dag 1: 10,5 %<br>Dag 2: 7,8 %<br>Dag 4–5: 7,2 %<br>Dag 7: 6,2 %<br>Dag 10: 7,1 % |

När HÖGRE är bättre

| Vuxna           | Resultatindikatorer*                                                                                                      | Pediatrik        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 92 %<br>[100 %] | <b>Klinisk noggrannhet</b><br><b>% av värden som var i Clarke Error Grid</b><br><b>(CEG) A-zon</b><br><br>[% CEG A+B zon] | 96 %<br>[99,8 %] |

\* Referens är YSI (Yellow Springs Laboratory Instrument)

## G.2 Produktspecifikationer

**WARNING:** Användning av tillbehör, kablar, adapttrar och laddare andra än de specificerade eller levererade av tillverkaren av utrustningen kan resultera i ökad elektromagnetisk strålning eller minskad elektromagnetisk immunitet hos utrustningen och resultera i felaktig drift.

**WARNING:** Portabel RF-kommunikationsutrustning (inklusive kringutrustning såsom antennkablar och externa antenner) bör inte användas närmare än 30 cm till någon del av G6 CGM-system inklusive kablar specificerade av tillverkaren. Annars kan försämring av prestandan hos utrustningen ske.

**WARNING!** Felaktig användning av USB-kabeln kan medföra risk för strypning.

Enheten betar sig normalt under laddning men håll inte i mottagaren under laddning längre än en minut eftersom enheten kan bli varm.

Ingen metod för rengöring är rekommenderad eller testad för mottagaren. Torka bara med en ren torr trasa.

**OBS!** Om det är svårt att läsa av mottagaren i starkt solljus ska du läsa av den i skuggan.

### Produktspecifikationer för sensor

|                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Glukosintervall</b>                        | 2,2–22,2 mmol/L                                              |
| <b>Användbart liv hos sensor</b>              | Upp till 10 dagar                                            |
| <b>Förhållanden vid lagring och transport</b> | Temperatur: 2°C–30°C<br>Förvara sensor på en sval torr plats |
| <b>Sterilisering</b>                          | Steril genom strålning                                       |

### Produktspecifikationer för sändare och mottagare

| <b>Modell</b>                        | <b>G6-sändare</b> | <b>Dexcom-mottagare</b>                             |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Lagringsutrymme</b>               |                   | 30 dagar glukosdata<br>10 dagar teknisk supportdata |
| <b>Elektrisk säkerhetsklass</b>      | Internt driven    | Internt driven                                      |
| <b>Batteriets livslängd (typisk)</b> | 3 månader         | 2 dagar                                             |

## Produktspecifikationer för sändare och mottagare

| Modell                                 | G6-sändare                                                                                             | Dexcom-mottagare                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Batteriets laddningstid                | Icke-laddningsbar                                                                                      | 3 timmar                                                                        |
| Driftförhållanden                      | Temperaturgräns: 10°C–42°C<br>Luftfuktighet: 10 %–95 % RH                                              | Temperatur: 0°C–45°C<br>Luftfuktighet: 15 %–95 % RH                             |
| Driftstemperatur vid laddning          | Inte tillämpligt                                                                                       | Temperatur: 0°C–40°C                                                            |
| Förhållanden vid lagring och transport | Temperatur: 0°C–45°C<br>Luftfuktighet: 10 %–95 % RH                                                    | Temperatur: 0°C–40°C<br>Luftfuktighet: 10 %–95 % RH                             |
| Drifthöjd                              | -396 meter till 4,206 meter                                                                            | -365 meter till 4,114 meter                                                     |
| Kapslingsklass                         | IP28: Skydd mot isättning av stora föremål och nedsänkning i vatten upp till 2,4 meter under 24 timmar | IP22: Skydd mot isättning av stora föremål och vertikalt fallande vattendroppar |
| Skydd mot elektrisk stöt               | Typ BF-applicerad komponent                                                                            | Inte tillämpligt                                                                |
| Larmljud                               | Inte tillämpligt                                                                                       | 50 dB <sub>SPL</sub> vid 1 meter                                                |
| TX/TR-frekvenser                       | 2,402–2,480 GHz                                                                                        |                                                                                 |
| Bandbredd                              | 1,07 MHz                                                                                               | 1,39 MHz                                                                        |
| Maximal utgångseffekt                  | 1,0 mW EIRP                                                                                            | 2,4 mW EIRP                                                                     |
| Modulering                             | Gaussian Frequency-Shift Keying                                                                        |                                                                                 |
| Datahastighet                          | 1 Mbit/s                                                                                               |                                                                                 |
| Område för data-kommunikation          | 6 meter                                                                                                |                                                                                 |

Den maximala yttemperaturen för tillämpad artikel = 43 °C.

## Centrala prestanda

G6-systemet mäter patientens glukossensorvärden med specificerad precision under de angivna driftsvillkoren. Centrala prestanda för G6 CGM-systemet innefattar även motsvarande uppmätta glukossensorvärden och varningar på display-enheten.

## Sammanfattning av tjänstekvalitet

Tjänstekvaliteten för G6-systemets trådlösa kommunikation via *Bluetooth Low Energy* garanteras inom en räckvidd på 6 meter fri yta mellan G6-sändaren och den parade displayenheten med 5 minuters intervall. Om anslutningen mellan sändaren och displayenheten bryts överförs eventuella paket som inte har skickats (inom 3 timmar) från sändaren till displayenheten när anslutningen återställs. G6 CGM-systemet är utformat för att endast acceptera radiokommunikation från igenkända och parade displayenheter.

## Säkerhetsåtgärder

G6-systemet är utformat för att överföra data mellan sändaren och avsedda displayenheter enligt industristandard för BLE-protokoll. Systemet accepterar inte radiokommunikation via något annat protokoll, inte heller klassiska *Bluetooth* kommunikationsprotokoll.

Utöver den säkerhet som säkerställs via BLE-anslutningen skyddas kommunikationen mellan G6-sändaren, G6-mottagaren och mobilappen med ytterligare säkerhetsnivåer och begränsningar med hjälp av ett egenutvecklat krypterat dataformat. Dataformatet inbegriper flera metoder för att säkerställa dataintegriteten och identifiera potentiella förekomster av datamanipulering. Flera olika krypteringsstandarder (t.ex. RSA och AES) används i delar av det egenutvecklade dataformatet.

Så länge som G6-mobilappen är aktiverad kommunicerar den regelbundet med Dexcoms servrar. Kommunikationen mellan G6-applikationen och Dexcoms servrar skyddas genom flera mekanismer som är utformade för att förhindra förvrängning av data. Däribland standardsystem för JWIT tokenbaserad autentisering och behörighetskontroll. All sådan kommunikation sker uteslutande över krypterade dataförbindelser med SSL-standardcertifikat.

## Specifikationer för USB-kabel för laddning/nedladdning

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Inmatning/utmatning | 5 V DC, 1A             |
| Typ                 | USB A till USB mikro B |
| Längd               | 0,91 meter             |

## Specifikationer för strömkälla/laddare

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Klass</b>        | II                                                        |
| <b>Inmatning</b>    | AC-input 100–240 Vac, 50/60Hz, 0,2A, 0,2A rms vid 100 Vac |
| <b>DC-utmatning</b> | 5V DC, 1A (5,0 Watt)                                      |

## Elektromagnetisk immunitet och utsläppsdeklaration och vägledning

Sändaren och mottagaren är ämnade för användning i den elektromagnetiska miljön som specificeras i nästa tabell. Kunden eller användaren av sändaren bör försäkra sig om att den används i en sådan miljö.

| Immunitetstest                                                           | Sändares efterlevnadsnivå              | Mottagares efterlevnadsnivå                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elektrostatisk urladdning</b><br>IEC 61000-4-2                        | $\pm 8$ kV kontakt<br>$\pm 15$ kV luft |                                                                                                                                               |
| <b>Magnetfält (50 Hz)</b><br>IEC 61000-4-8                               | 30 A/m                                 |                                                                                                                                               |
| <b>Snabba elektriska urladdningar</b><br>IEC 61000-4-4                   | Inte tillämpligt                       | $\pm 2$ kV för strömförsörjningsledning                                                                                                       |
| <b>Tillströmning</b><br>IEC 61000-4-5                                    | Inte tillämpligt                       | $\pm 0,5$ kV, $\pm 1$ kV ledning(ar) till ledning(ar)                                                                                         |
| <b>Dippar och avbrott i spänning</b><br>IEC 61000-4-11<br>IEC 60601-1-11 | Inte tillämpligt                       | 0 % 230 V för 1 cykel<br>0 % 230 V för 0,5 cykel vid 8 fasvinklar<br>70 % 230 V (30 % dipp i 230 V) för 25 cykler<br>0 % 230 V för 250 cykler |
| <b>Utförda fältstörningar</b><br>IEC 61000-4-6                           | Inte tillämpligt                       | 6 Vrms<br>150 kHz to 80 MHz                                                                                                                   |

| <b>Immunitetstest</b>                                              | <b>Sändares efterlevnadsnivå</b>                                                                                                               | <b>Mottagares efterlevnadsnivå</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Utförda fältstörningar</b><br><b>IEC 61000-4-3</b>              | 10 V/m<br>vid 80 MHz till 2700 MHz (AM-modulering)                                                                                             |                                    |
| <b>Strålförmiga och ledande fält</b><br><b>Flygplansanvändning</b> | FAA RTCA/DO-160 utgåva G avsnitt 20 kategori T.<br>Kan användas i flygplan enligt de instruktioner tillhandahållna av operatören av flygplanet |                                    |

Elektromagnetiska störningar kan fortfarande förekomma i hemmiljö eftersom kontroll över EMC-miljön inte kan garanteras. Alla störningar kan kännas igen via gap i G6-värdena eller uppenbara felaktigheter. Användaren uppmanas att försöka mildra dessa effekter via en av följande åtgärder:

- Om dina symptom inte stämmer överens med ditt G6-värde ska du använda värdena från din blodglukosmätare för behandlingsbeslut. Om G6-värdena återkommande inte stämmer överens med dina symptom eller dina blodglukosmätarvärden ska du rådfråga en läkare om användningen av Dexcom G6 för din diabetes. Läkaren kan hjälpa dig och visa hur du använder enheten på bästa sätt.
- Om displayenhet saknar 20 minuter glukosdata (4 värden) visas felmeddelande om förlorad signal. För att lösa, se bilaga A Felsökning.
- Om displayenhet visar laddningsskärmen oväntat och inte visar trendskärmen inom 3 minuter, kontakta din lokala Dexcom-representant. För mer information, se bilaga A Felsökning.
- Om din mottagares pekskärm inte fungerar under 6 minuter, kontakta din lokala Dexcom-representant.

## Specifikationer för elektromagnetisk strålning

| Immunitetstest                                   | Efterlevnad                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Radiofrekvensen utgivning<br>CISPR 11            | Grupp 1, klass B                                                                     |
| Radiofrekvensen utgivning<br>Flygplansanvändning | Uppfyller FFA RTCA/DO-160 utgåva G avsnitt 21,<br>kategori M för användning i kabin. |

### G.3 Efterlevnad av radioförfordningar

Härmed förklarar Dexcom, Inc. att radioutrustningstypen Dexcom G6 System överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: **[dexcom.com/doc](https://dexcom.com/doc)**.

# Bilaga H: Instruktioner för professionell användning

## H.1 Instruktioner

G6 stödjer multianvändning. Du förbereder bara G6 för din patient, förbered din patient för G6, ställ in G6 med patienten och därefter följ upp med denna för att dela insikter om patientens glukostrender, mönster och statistik. Detta hjälper er båda att hantera patientens diabetes bättre. Följande avsnitt går igenom varje steg och ger dig resurser att dela med dina patienter medan du vägleder dem genom en sensorsession.

## H.2. Förbereda G6 för patient

Välj först huruvida patienten borde kunna se sina G6-värden (icke-dolda). Kommer detta motivera dem till att hantera sin diabetes bättre?

Oavsett om G6-mottagaren är dold eller icke-dold, alla G6-patienter:

- Måste bära sina mottagare så att de registrerar deras data för senare analyser.
- Få systemvarningar (inklusive: parkoppla sändare, starta sensor, ny sensor, förlorad signal, inga värden, kalibrering).

Skillnaden mellan dold och icke-dold är:

- Icke-dold: mottagare visar patientens G6-värden, pil, diagram och alla glukosrelaterade larm/varningar (dvs. akut lågt värde, snart akut lågt värde, lågt glukos, högt glukos, stigande eller fallande).
- Dold: mottagare visar inte någon dold information. Dessutom, den visar inte hela meddelandet vid uppvärmning.

Gå till **clarity.dexcom.eu** för mer information (kanske inte är tillgänglig i alla regioner).

Följ instruktionerna för att rensa och desinfektera mottagaren och sändaren mellan patienter. Vid användning för flera patienter, använd inte det mjuka fodralet av plast (tillbehör) för mottagaren.

## 1. Förbered mottagare

### a. Ladda och återställning

- Ladda mottagaren
- Återställning:
  - Återställer du mottagaren tar det bort data för den tidigare patienten. För att säkerställa patientens sekretess, återställ mottagaren efter varje användning.
  - Avgör huruvida din patient behöver se sin sensorinformation (icke-dold) eller inte (dold) medan de använder G6.

### b. Torka av

- Torka av mottagaren med en ren och torr trasa
  - Om det finns ett skydd på mottagaren ska du ta bort och kassera detta före avtorkning. Följ lokala föreskrifter för bortskaffande av potentiellt infekterat material.
  - Använd inte sträva trasor, handdukar, pappershanddukar eller liknande föremål
  - Låt inte fukt tränga in i någon öppning
  - Använd inte aerosolsprej, lösningsmedel eller slipmedel

## 2.

### Sätt skyddet på mottagaren (mottagaren har inte desinficerats, skydd används i stället)

#### a. Förbereda

- Tvätta händer och använd rena handskar
- Använd ett nytt skydd för varje patient för att skydda patienten från kontamination
- Hämta ett skydd, triangel-försegling och USB-skydd



Skydd



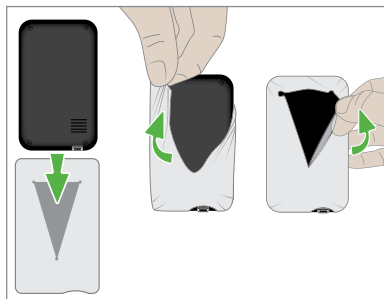
Triangel-försegling



USB-skydd

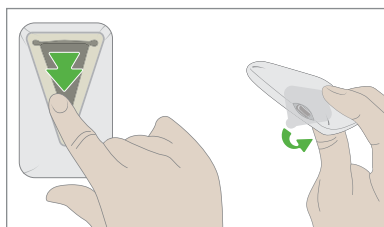
### **b. Placera mottagare i skydd**

- Placera mottagare tillsammans med skyddet så att mottagarens skärm är riktad bort från öppningen och USB-porten placerad vid öppningen för USB-porten
- Placera mottagaren i den v-formade öppningen
- Sträck skyddet över mottagaren



### **c. Försegla med tejp**

- Plocka bort triangeln från den självhäftande baksidan
- Placera förslutningen över öppningen hos skyddet på baksidan av mottagaren
- Plocka bort den fyrkantiga förslutningen från den självhäftande baksidan
- Placera över USB-öppningen för att skapa en dörr



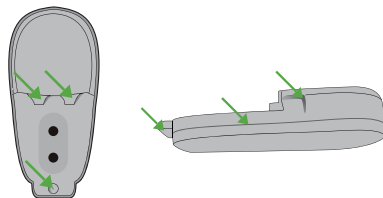
## **3. Rengöra sändare**

### **a. Förbereda**

- Skydda: Använd rena handskar och skyddsglasögon
- Förbereda blötläggning: Placera lösningen Clorox Healthcare® Bleach Germicidal Cleaner (Clorox) i en behållare som är tillräckligt djup för sändaren

### **b. Rengöra**

- Skölja och skrubba: Skölj sändaren i kallt kranvatten medan du borstar den med en mjuk borste tills all synlig smuts är borta
- Blötlägga och skrubba:
  - Blötlägg sändaren i 3 minuter
  - Under blötläggningen skrubbar du ojämna områden (se gröna pilar) med en mjuk borste eller torkduk förinränkt med blekmedel



### **c. Skölja och torka**

- Skölja: Plocka upp sändaren ur blötläggningen och skölj under rinnande kallt kranvatten i 10 sekunder
- Torka: Torka sändaren torr med trasa

### **d. Inspektera**

- Kontrollera att det inte finns någon synlig smuts. Vid förekomst av smuts, tvätta på nytt.

#### **4. Desinfektera sändaren**

##### **a. Förbereda**

- Skydda: Använd rena handskar och skyddsglasögon
- Förbereda blötläggning och spruta:
  - Håll CaviCide®-lösning (Cavicide) i en behållare som är tillräckligt djup för sändaren
  - Fyll sprutan med cirka 30 mL Cavicide

##### **b. Desinficera**

- Spola:
  - Fokusera på ojämna områden
  - Snurra sändaren i Cavicide i 10 sekunder
  - Fyll på sprutan
- Skrubba:
  - Blötlägg rena kläder eller torka med Cavicide
  - Torka hela sändaren under minst 3 minuter eller tills all smuts är borta
  - Fokusera på ojämna områden
- Spola:
  - Fokusera på ojämna områden
  - Snurra sändaren i Cavicide i 10 sekunder
- Blötlägga:
  - Placera sändaren i förberedd blötläggning
  - Snurra den under 30 sekunder
  - Låt den därefter ligga i blötläggningsytterligare 3 minuter

##### **c. Skölja och torka**

- Skölja: Plocka upp sändaren ur blötläggningsytan och skölj under rinnande kallt kranvatten i 10 sekunder
- Torka: Torka sändaren torr med trasa

## H.3 Förbereda patient för G6

Denna tabell visar vad som behövs förklaras för din patient och vart du kan hitta information för patienter för att hjälpa dem förstå.

| Förklara                             | Visa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vad CGM är                           | Se avsnittet "Vad den gör" i handboken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| G6-komponenter                       | Se avsnittet "Översikt av G6" i handboken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skydd hos mottagare och USB-täckning | <p>Berätta för din patient att hålla mottagaren i skyddet och hålla skyddet torrt.</p> <p>Visa dem hur de öppnar och stänger USB-skyddet där de laddar mottagaren. Mottagaren behöver laddas varannan dag. Ge dem extra USB-skydd. Berätta för dem att ersätta USB-skyddet när det håller på att lossna.</p> <p>Berätta för patienten att berätta för dig och lämna tillbaka mottagaren om:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hål uppstår i skyddet</li><li>• De har slut på USB-skydd</li></ul> |

## H.4. Ställa in G6 med patient

### Ställ in med dolda och icke-dolda patienter

Med din patient, följ instruktioner för inställning i "Starta här" för att starta appen eller mottagaren.

Var noggrann med att skriva in sensorkoden på applikatorns självhäftande baksida.



Instruktionerna för inställning inkluderar sätta i sensorn och fästa sändaren.

## Ytterligare inställning med dolda patienter

Förklara varför patienten använder det dolda läget.

## Ytterligare inställning med icke-dolda patienter

Under inställning av G6 med din patient kommer du skapa ett personifierat målområde för glukosvärde genom att ställa in larm för lågt och högt värde lämpligt för deras A1C.

Under sensorns 2 timmar långa uppvärmning, använd tabellen nedan till att förklara hur informationen på G6 ska tolkas.

| Förklara                | Visa                                                                                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introducera hemskärmen  | Kapitel 3 Översikt av hemskärm                                                                                                             |
| Vad är larm/varningar   | Kapitel 4 Larm/varningar                                                                                                                   |
| Hantera diabetes med G6 | Kapitel 5: Behandlingsbeslut                                                                                                               |
| Hjälpmedel              | Föreslå din patient att gå igenom handledningen på egen hand för att granska informationen du introducerat.                                |
| Dexcom Clarity-appen    | Låt dina patienter som använder appen få veta om Claritys trender, statistik och mönster. Se <b>clarity.dexcom.eu</b> för mer information. |

## H.5 Följ upp med patient

För patienter som använder appen kan du, när som helst under sensorsessionen, gå till **clarity.dexcom.eu** för att se deras glukosdata. För patienter som använder mottagare finns informationen tillgänglig efter att de lämnat tillbaka mottagaren och du laddat upp dessa data (se **clarity.dexcom.eu**). Clarity identifierar trender, mönster och presenterar statistik. Du kan se över denna information med patienten för att ge insikt om hur denne kan hantera sin diabetes bättre.

Vid slutet av sessionen, avlägsna G6 från patienten. Se kapitel 6 "Starta en ny sensor eller sändare" för mer information.

## H.6 Nästa steg

Din patient vill ha sin egen G6. Den finns tillgänglig för personlig användning. Hänvisa dem till din lokala Dexcom-representant för mer information.

Du är redo att använda G6 på en annan patient och introducera fördelarna hos G6 för dem.

# Bilaga I: Risker och fördelar

Det finns risker och fördelar när du använder en medicinteknisk produkt. I detta kapitel berättar vi vilka de är.

## I.1 Risker

Riskerna med att använda Dexcom G6-systemet för kontinuerlig glukosmätning (G6) är:

- Att inte få dina larm/varningar
- Att använda G6 för att fatta behandlingsbeslut när du inte borde det
- Problem med sensorinsättning

Detta kapitel beskriver samtliga dessa risker i detalj.

Följ systemets anvisningar. Om du inte gör det kan du få en händelse med akut låga eller höga glukosvärden.

### Att inte få larm/varningar

Om du inte får dina larm/varningar kan du ha akut låga eller höga glukosvärden utan att veta om det. Kontrollera din display-enhet:

- Batteri laddat: Om display-enhetens batteri är dött får du inga värden eller larm/varningar från G6.
- App på: Håll appen på så att du får värden eller larm/varningar från G6.
- Varningar på: Håll varningsfunktionen på för att få larm/varningar.
- Volym upp: Håll volymen tillräckligt högt för att du ska kunna höra dina larm/varningar.
- Högtalaren och vibrationerna fungerar: Om högtalaren eller vibrationerna inte fungerar, hör eller känner du inte dina larm/varningar.
- Inom intervallet: Håll din display-enhet inom 6 meter från din sändare, utan hinder mellan dem. De behöver befinna sig så nära varandra för att kunna kommunicera. Om avståndet är för stort får du inga värden eller larm/varningar från G6.
- Inga systemfel: Om du får ett systemfel – som Inga värden, Sensorfel eller Signalförlust – får du inga värden eller larm/varningar från G6.

- Under uppvärmningen och efter sessionens slut: Du får inga värden eller larm/varningar från G6 under 2-timmars-uppvärmningen eller efter sensorsessionens slut.

Se Felsökning (bilaga A) och rekommenderade inställningar (i kapitel 2) för mer information.

## Att använda G6 för att fatta behandlingsbeslut

Du kan använda din G6 för att behandla lågt värde eller dosera för högt värde i alla utom dessa få situationer. Se tabellen nedan för detaljer.

| Situation                                                          | Verktyg för behandlingsbeslut                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Din känsla stämmer överens med ditt G6-värde                       | Använd din CGM för att fatta ett behandlingsbeslut                                                   |
| Din känsla stämmer inte överens med ditt G6-värde                  | Ta ett glukosvärde från stick i fingret med din blodglukosmätare för att fatta ett behandlingsbeslut |
| Din CGM visar ett sensor-glukosnummer och pil(ar)                  | Använd din CGM för att fatta ett behandlingsbeslut                                                   |
| Din CGM-display saknar G6-värde (nummer) eller pil(ar), eller båda | Ta ett glukosvärde från stick i fingret med din mätare för att fatta ett behandlingsbeslut           |

Använd din G6 för behandlingsbeslut, inte dina följare: Med Dexcom Share kan du dela din sensor-glukosinformation från din smartenhet till dina följare. Den huvudsakliga risken med Share är att missförstå syftet. Informationen på din display-enhet är den mest aktuella – den kommer direkt från din sändare – så använd endast den för behandlingsbeslut. Det kan finnas tekniska problem och fördröjningar när du delar information. Följarna kan kontakta dig och ge dig stöd, men förlita dig inte på att de eller deras information kan behandla din diabetes.

En del användare har anmärkt att mätnoggrannheten mellan olika sensorer varierar betydligt. När du sätter i respektive sensor ska du kontrollera dess mätnoggrannhet innan du bestämmer dig för att använda den för behandlingsbeslut.

Du hittar mer information om hur du fattar behandlingsbeslut med hjälp av din G6 i kapitel 5. Du hittar mer information om Share i kapitel 7.

## Risker med störande ämnen

I tidigare generationer av Dexcoms CGM-system (G4/G5) kunde dina sensorvärden påverkas av paracetamol/acetaminofen så att de verkade högre än de i själva verket var. Men med G6 kan du ta en standard- eller maxdos paracetamol/acetaminofen på 1 gram (1 000 mg) var 6:e timme och ändå använda G6-värdena för att fatta behandlingsbeslut. Om du tar en högre dos än maxdosen paracetamol/acetaminofen (t.ex. > 1 gram var 6:e timme för vuxna) kan det påverka G6-värdena så att de ser högre ut än de faktiska värdena.

Hydroxikarbamid får dock dina G6-värden att se högre ut än de faktiskt är. Hur mycket högre värdena blir beror på mängden hydroxikarbamid i kroppen. Om du tar hydroxikarbamid ska du använda din blodglukosmätare för behandlingsbeslut.

## Risker med sensorinsättning

I sällsynta fall kan sensorinsättningen orsaka infektion, blödning eller smärta, och häftan kan irritera huden. Endast några få patienter i de kliniska studierna av G6 drabbades av lätt rodnad och svullnad.

Inga sensortrådar gick av i de kliniska studierna, men det finns en liten risk att en sensortråd kan gå av eller slitas av och bli kvar under huden. Sterila avslitna sensortrådar utgör vanligtvis ingen betydande medicinsk risk. Om en sensortråd går av eller slits av och blir kvar under huden ska du kontakta din vårdgivare och den tekniska supporten på **dexcom.com** eller din lokala Dexcom-representant

## I.2 Fördelar

Några av fördelarna med att använda din G6 är:

- Du ser dina trender
- Att fatta behandlingsbeslut med hjälp av din G6
- Att hantera din diabetes
- Att du varnas vid låga och höga G6-värden

Detta avsnitt behandlar samtliga dessa fördelar i detalj.

## Se dina trender

G6 skickar dig ett värde var 5:e minut. Den ger också rapporter och vyer över din information så att du kan upptäcka och reflektera över trender, mönster och hur din kropp reagerar på olika saker, som träning eller pizza. På så sätt ser du den stora bilden över dina glukosvärden och hur dina glukostrender påverkas av dina dagliga vanor.

## Att fatta behandlingsbeslut med hjälp av G6

Du kan använda ditt G6-värde och trendpilen för att fatta behandlingsbeslut – som att behandla vid för lågt eller dosera vid för högt värde. Se kapitel 5 för mer information om behandlingsbeslut. Med G6 finns det inget behov av att ta fingersticksmätningar för att kalibrera systemet eller för behandlingsbeslut (så länge dina symtom matchar dina G6-värden). Detta kan minska smärtan och bördan av överdrivna fingersticksmätningar (Aleppo 2017) och minska potentiella fel på grund av felaktig kalibrering.

## Att hjälpa din diabetesbehandling

Larm-/varningsfunktionerna (kapitel 4) håller dig medveten om dina glukosnivåer. Larm/varningar varnar dig när ditt glukosvärde är utanför målintervallet, blir för lågt eller för högt, stiger eller sjunker snabbt. På så sätt kan du vidta åtgärder för att förhindra att ditt glukosvärde blir för lågt eller för högt (Pettus 2015).

En del människor märker av en ökad livskvalitet och sinnesro när de använder kontinuerlig glukosmätning i realtid (Polonsky 2017). Share kan förbättra livskvaliteten och sinnesron för patienter, deras vårdgivare och deras supportteam eftersom följarna får G6-värden och larm/varningar på distans. Följarna kan sedan ta kontakt när G6-värdena blir för låga eller för höga.

## Referenser

Aleppo, Grazia, Katrina Ruedy, Tonya Riddlesworth, Davida Kruger, Anne Peters, Irl Hirsch, Richard Bergenstal, Elena Toschi, Andrew Ahmann, Viral Shah, Michael Rickels, Bruce Bode, Athena Philis-Tsimikas, Rodica Pop-Busui, Henry Rodriguez, Emily Eyth, Anuj Bhargava, Craig Kollman, and Roy Beck. 2017. "Replace-BG: a randomized trial comparing continuous glucose monitoring with and without routine blood glucose monitoring in well-controlled adults with type 1 diabetes." *Diabetes Care*. 40(4):538-545. doi: 10.2337/dc16-2482.

Beck, Roy, Tonya Riddlesworth, Katrina Ruedy, Andrew Ahmann, Richard Bergenstal, Stacie Haller, Craig Kollman, Davida Kruger, Janet McGill, William Polonsky, Elena Roschi, Howard Wolpert, and David Price for the DIAMOND Study Group. 2017. "Effect of continuous glucose monitoring on glycemic control in adults with type 1 diabetes using insulin injections: the DIAMOND randomized clinical trial." *JAMA*. 317(4):371-378. doi:10.1001/jama.2016.19975.

The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. September 30, 1993. "The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus." *N Engl J Med*. 329:977-986.

Lind, Marcus, William Polonsky, Irl Hirsch, Tim Heise, Jan Bolinder, Sofia Dahlqvist, Erik Schwarz, Arndis Finna Olafsdottir, Anders Frid, Hand Wedel, Elsa Ahlen, Thomas Nystom, and Jarl Hellman. 2017. "Continuous glucose monitoring vs conventional therapy for glycemic control in adults with type 1 diabetes treated with multiple daily insulin injections: the gold randomized clinical trial." *JAMA*. 317(4):379-387. doi:10.1001/jama.2016.19976.

Pettus, Jeremy, David Price, and Steven Edelman. 2015. "How patients with type 1 diabetes translate continuous glucose monitoring data into diabetes management decisions." *Endocr Pract*. 21(6):613-620. doi: 10.4158/EP14520.OR.

Polonsky, William, Danielle Hessler, Katrina Ruedy, Roy Beck, for the DIAMOND Study Group. 2017. "The impact of continuous glucose monitoring on markers of quality of life in adults with type 1 diabetes: further findings from the DIAMOND randomized clinical trial." *Diabetes Care*. 40(6):736-741. doi: 10.2337/dc17-0133.

# Bilaga J: Ordlista

|                                |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1C                            | Blodprov för att diagnostisera typ 1- eller 2-diabetes och för att mäta hur bra du hanterar din diabetes. HbA1C reflekterar din genomsnittliga blodsockernivå för de senaste 2 till 3 månaderna. |
| Android                        | Operativsystem som används för smarta enheter.                                                                                                                                                   |
| Android Wear                   | En typ av smartklocka.                                                                                                                                                                           |
| Anvisningar                    | Hur, för vilket syfte och under vilka omständigheter du ska använda G6.                                                                                                                          |
| App eller applikation          | Mjukvara installerad på en smart eller mobil enhet.<br>G6-appen visar kontinuerligt glukosövervakning.                                                                                           |
| App Store eller Play Store     | Affär online för nerladdning av applikation till en smart enhet.                                                                                                                                 |
| Apple klocka                   | En smart klocka för iPhone.                                                                                                                                                                      |
| Blodglukos (BG) mätare         | En medicinsk enhet som används till att mäta hur mycket glukos som finns i blodet.                                                                                                               |
| Blodglukos (BG) värde          | Blodglukosvärde är mängden glukos i blodet uppmätt med mätare.                                                                                                                                   |
| <i>Bluetooth</i>               | En teknik som tillåter enheter att trådlöst kommunicera med varandra.                                                                                                                            |
| Delare                         | G6-användaren som delar sin G6-information med följare.                                                                                                                                          |
| Flygplansläge                  | En inställning på en smart enhet där vissa funktioner är inaktiverade för att efterleva förordningar hos flygbolag.                                                                              |
| Följare                        | En person som mottar en delares information i Follow.                                                                                                                                            |
| Follow eller Dexcom Follow-App | En Dexcom-app som används till att övervaka en annan användares glukosinformation och larm.                                                                                                      |
| Förinställd                    | En tillverkares förinställda inställningar för en enhetsinställning.                                                                                                                             |
| Försiktighets-åtgärder         | Extra försiktighet bör vidtas av dig och din vårdpersonal för säker och effektiv användning av G6.                                                                                               |
| G6-värde                       | Glukoskoncentrationen uppmätt i interstitiell vätska.                                                                                                                                            |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyperglykemi                    | <p>Högt BG. Samma som "högt" eller högt blodsocker. Hyperglykemi karaktäriseras av ett överskott av glukos i blodomloppet.</p> <p>Det är viktigt att behandla hyperglykemi. Om obehandlad kan hyperglykemi leda till allvarliga konsekvenser.</p> <p>Konsultera din vårdpersonal för att avgöra nödvändig inställning för hyperglykemi för dig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hypoglykemi                     | <p>Lågt BG. Samma som "lågt" eller lågt blodsocker. Hypoglykemi karaktäriseras av en låg nivå av glukos i blodomloppet.</p> <p>Det är viktigt att behandla hypoglykemi. Om obehandlad kan hypoglykemi leda till allvarliga konsekvenser.</p> <p>Rådfråga din vårdpersonal för att avgöra nödvändig inställning för hypoglykemi för dig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| iOS                             | Operativsystem som används för Apples smarta enheter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IP                              | <p>Den internationella elektrotekniska kommissionen (IES) är en ideell, icke-statlig, internationell organisation grundad för att producera säkerhetsstandarder för elektronik. En av säkerhetsstandarderna är kapslingsklass (IP) som klassificerar och uppskattar hur skyddad en elektronisk enhet är mot damm, vatten, olyckshändelser, etc.</p> <p>Kapslingsklasser är numeriska med numret baserat på förhållanden den elektroniska enheten stöter på.</p> <p>En IP22-värdering låter dig veta att din elektroniska enhet inte kommer låt dig sticka dina fingrar i den och kommer inte skadas eller vara osäker under specifik testning med vatten droppandes ner.</p> |
| Kalibrering                     | <p>När du kalibrerar tar du ett fingerstick för din mätare och därefter skriver in värdet i din mottagare eller smarta enhet.</p> <p>Kalibrering av din G6 är frivilligt. Kalibrering kan få dina G6-värden att matcha din mätares värden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kontinuerlig glukos-övervakning | En sensor insatt under huden kontrollerar glukosnivån i interstitiell vätska. En sändare skickar värden till en displayenhet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kontraindikation                | En situation där G6 inte bör användas för att den kan vara skadlig för dig. Riskerna vid användning är större än fördelarna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meddelande               | Ett app-meddelande som dyker upp på skärmen hos en smart enhet. Meddelande kan också inkludera ett ljud eller vibration beroende på inställningarna hos den smarta enheten.                                                                                             |
| mg/dL                    | Milligram per deciliter. Standardenheten vid mätning för BG-värden i USA.                                                                                                                                                                                               |
| mmol/L                   | Millimol per liter. En måtenhet för BG-värden.                                                                                                                                                                                                                          |
| Piratkopiering           | Borttagande av begränsningar och säkerhetsåtgärder inställda av tillverkaren på en smart enhet. Borttagande utgör en säkerhetsrisk och data kan bli sårbar.<br><br>Installera inte G6-appen på en olagligt uppläst smart enhet. Den kanske inte kommer fungera korrekt. |
| Säkerhets-förklaring     | Ett uttalande om den tänkta användningen av G6 och relevanta varningar, försiktighetsåtgärder och kontraindikation.                                                                                                                                                     |
| Sensorsession            | Perioden efter att ha satt in en ny sensor. Under denna period visas ditt G6-värde på din displayenhet var 5 minut.                                                                                                                                                     |
| Share eller Dexcom Share | En funktion hos Dexcom G6 appen som låter dig säkert skicka din G6-information till följare.                                                                                                                                                                            |
| Simultan röst och data   | Förmågan att ringa ett samtal och få tillgång till internet på samma cellulära anslutning samtidigt.                                                                                                                                                                    |
| Smart eller mobil enhet  | En elektronisk enhet som är sladdlös, mobil och ansluten till internet såsom en smartphone eller läsplatta.                                                                                                                                                             |
| Smartklocka              | En klocka som kommunicerar med och förlänger en smart enhet. Till exempel en Apple-klocka.                                                                                                                                                                              |
| Stapla insulin           | Ta en dos insulin strax efter din senaste dos. Detta kan resultera i lågt blodsocker. Syftar inte till att ta insulin doser för att täcka måltider.                                                                                                                     |
| Test av annan plats      | Använda ett blodprov från annan plats än fingertopparna (variation) som till exempel handflatan, underarmen eller överarmen för mätarvärden.<br><br>Använd inte en alternativ plats till att kalibrera din G6. Använd endast mätningar från fingerstick.                |

|           |                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tillbehör | Hårdvara ansluten till din smarta enhet. Till exempel, <i>Bluetooth</i> hörlurar, Apple klocka eller annan smart klocka. |
| Varning   | Beskriver seriösa och livshotande omständigheter, konsekvenserna och hur man undviker faror vid användning av G6.        |

# Index

Alltid ljud, 48

Använd blodsockermätare istället för G6, 32

Avsluta sensorsession tidigt, 61

Behandlingsbeslut, 32, 34

Clarity, 77

Diagram

    Saknar värden, 62

    Värde, 21

Felmeddelande, 23, 58

Felsökning, 52

Follow, 42

Garanti, 84

Hemskärm, 19

Hjälpmedel, 2, 52

Händelser, 24

Högt värde, 22

Ingen sensorkod, 63

Kalibrera, 56, 58

Kan inte höra larm/varningar, 57

Ladda mottagare, 63

Larm för akut lågt glukosvärde, 26

Larm och varningar

    Förlorad signal, 59

    Inga värden, 59

    Kalibrering och omkalibrering, 58

    Larm för akut lågt glukosvärde, 26

    Larm om högt glukosvärde, 27

    Larm om lågt glukos, 27

    Larm om snart akut lågt värde, 3, 27

    Vanligt larm, 58

    Varning hos sändare, 60

Larm om ej hittad sändare, 61

Larm om högt värde, 27

Larm om låg batterinivå i sändare, 60

Larm om saknade värden, 59

Larm om sista session, 60

Ljud, 29

    Använda alltid ljud, 48

Ljud för larm/varningar medan displayenheten är ljudlös/tyst, 48

Ljudlös, 48, 57

Lågt värde, 22

Låsskärm, 14, 70

Meddelanden, 26

    Vanligt, 58

    Ändra, 28

Mål, 30

Noggrannhet

    G6-värden matchar inte blodsockervärdet som visas på mätaren, 53

    G6-värden matchar inte symptom, 53

Ordlista, 109

Professionell användning, 96

Resande, 11  
Schema, 49  
    Förinställd, 49  
Sensorkod  
    Ingen, 63  
Sensorsession  
    Avsluta tidigt, 61  
    Definition, 111  
    Starta utan sensorkod, 63  
Share, 42  
Självhäftande plåster, 54  
Skydd, 97  
Skydd hos mottagare, 97  
Smartklocka, 14, 73  
Snart akut lågt, 27  
Stapla insulin, 33  
Ställa in, 2  
Ställ in utan sensorkod, 63  
Symboler, 80  
Säkerhet, 11  
Säkerhetsförklaring, 5  
Teknisk information, 89  
Trendpil, 19, 21  
Tyst, 48, 57  
Underhåll, 78  
Varning hos sändare, 60  
Varning om förlorad signal, 59  
Varningsschema, 49  
Vatten och G6, 69  
Vägledning, 2  
Vänta och se, 33  
Värden matchar inte BG-mätarens värde, 53  
Värden matchar inte symptom, 53



© 2023 Dexcom, Inc. Med ensamrätt.

Skyddas av patent, **[dexcom.com/patents](https://dexcom.com/patents)**.

Dexcom, Dexcom Share, Share, Dexcom Follow och Dexcom Clarity är registrerade varumärken som tillhör Dexcom, Inc. i USA och eventuellt i andra länder. *Bluetooth* är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG. Apple är ett varumärke som tillhör Apple Inc. registrerat i USA och andra länder. Android je registrovaná ochranná známka spoločnosti Google LLC. Alla andra märken tillhör respektive ägare.

# Dexcom



Dexcom, Inc.  
6340 Sequence Drive  
San Diego, CA 92121 USA

+1 858 200 0200  
**dexcom.com**

Utanför USA: kontakta din  
lokala Dexcom-representant.



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany



LBL016313 Rev 005 MT25286

Rev Date: 2023/09