

Börja här



Översikt G7

G7 visar din glukosinformation på dina display-enheter.


Vad ingår i sensorförpackningen

Sensor och applikator



- Under uppstarten visar vi hur du använder applikatorn för att sätta in den inbyggda sensorn
- Sensorn skickar ett glukosvärde till din(a) display-enhet(er) var 5:e minut
- Sensorn varar upp till 10 dagar med en reservperiod på 12 timmar

Förstärkningshäfta

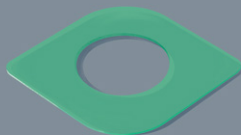

När du har satt in sensorn kan du använda förstärkningshäftan för att hålla fast sensorn på huden.

Anvisningar

Anvisningar hittar du under uppstarten i appen eller i paketet med förstärkningshäftan.

Översikt G7

G7 visar din glukosinformation på dina display-enheter.

Vilken display-enhet vill du starta?

- **App**

Gå till avsnittet: Starta upp appen

- **Mottagare**

Gå till avsnittet: Starta upp mottagaren

Använd upp till 3 display-enheter

Få din glukosinformation på din telefon, Apple Watch och Dexcom-mottagaren.

Du kan ställa in appen, mottagaren eller båda, i vilken ordning som helst.

Appen eller mottagaren kanske inte är tillgänglig i alla regioner.

Du ser vilka smartphones och operativsystem som stöds på:

dexcom.com/compatibility

Starta upp appen

1. Kom igång

Måste ha säker internetåtkomst under uppstart.

- Gå till Apple App Store eller Google Play butiken för att ladda ned Dexcom G7-appen




Dexcom G7

★★★★☆ 4.3 K

- Öppna appen
- Logga in eller skapa ett konto

3. Uppvärmning av sensor

Timern för uppvärmning av sensor talar om när du kan börja läsa av värden och varningar.

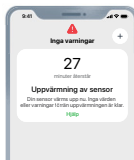

2. Uppstart

- Följ appens anvisningar för att starta upp appen
- För anvisningar om hur du sätter in sensorn ska du följa appens anvisningar eller gå till anvisningarna
Insättning av sensor i sensorförpackningen
- Efter införande och parkoppling, följ lokala riktlinjer för att kassera applikatorn och återvinna Dexcom-förpackningen

4. Din sensor-session

Gå till *Användarguiden för G7* för mer information.

Starta upp mottagaren

1. Kom igång

Tryck på knappen **Välj** i 3–5 sekunder för att sätta på mottagaren



2. Upptart

- Följ anvisningarna på mottagarens skärm för att starta upp mottagaren
- För anvisningar om hur du sätter in sensorn ska du gå till anvisningarna *Insättning av sensor* i sensorförpackningen
- Efter införande och parkoppling, följ lokala riktlinjer för att kassera applikatoren och återvinna Dexcom-förpackningen

3. Uppvärmning av sensor

Timern för uppvärmning av sensor talar om när du kan börja läsa av värden och varningar.



4. Din sensor-session

Gå till *Användarguiden för G7* för mer information.

Navigering av mottagaren

Mottagarens skärm visar vilken knapp du ska trycka på.

- För att bläddra snabbare ska du hålla knappen **Bläddra** intryckt
- Gå till nästa fält med knappen **Välj**





© 2023 Dexcom, Inc. Eftertryck förbjuds.

Omfattas av patent dexcom.com/patents.

Dexcom är ett registrerat varumärke som tillhör Dexcom, Inc. i USA och/eller andra länder. *Bluetooth* är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG. Apple är ett varumärke som ägs av Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder. Android är ett varumärke för Google LLC. Samtliga övriga varumärken tillhör respektive ägare.

dexcomG7



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
+1.858.200.0200
dexcom.com

Utanför USA: Kontakta din
lokala Dexcom-representant

CE
2797

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

UK
CA
0086

UK REP

MDSS-UK RP Ltd.
6 Wilmslow Road, Rusholme
Manchester M14 5TP
United Kingdom