

Buradan Başla



G7 Temel bilgiler

G7, glukoz bilgilerinizi görüntüleme cihazlarınızda görüntüler.


Sensör Kutusunda ne var

Sensör ve Aplikatör



- Kurulum sırasında, entegre sensörü cildinizin altına yerleştirmek için aplikatörü nasıl kullanacağınızı göstereceğiz.
- Sensör, görüntüleme cihaz(lar)ınıza her 5 dakikada bir, bir glukoz değeri gönderir.
- Sensör, en fazla 10 gün ve ek olarak 12 saat daha çalışır.

Koruyucu bant

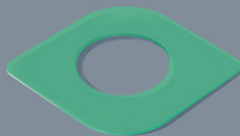

Sensörü yerleştirdikten sonra, sensörün cildinizde kalmasına yardımcı olmak için koruyucu bandı kullanabilirsiniz.

Talimatlar

Kurulum sırasında, uygulamada veya koruyucu bant ile aynı pakette gelen sensör yerleştirme talimatlarını kullanın.

G7 Temel bilgiler

G7, glukoz bilgilerinizi görüntüleme cihazlarınızda görüntüler.

Hangi Görüntüleme Cihazını Ayarlıyorsunuz?

- **Uygulama**

Bu bölüme gidin: Uygulamayı Ayarlama

- **Alıcı**

Bu bölüme gidin: Alıcıyı Ayarlama

Maksimum 3 Görüntüleme Cihazı kullan

Glukoz bilgilerinizi telefonunuz, Apple Kol Saatiniz ve Dexcom alıcınız vasıtası ile alın.

Uygulamayı, alıcıyı veya her ikisini de istediğiniz sıraya göre ayarlayabilirsiniz.

Uygulama veya alıcı tüm bölgelerde mevcut olmayabilir.

Desteklenen akıllı telefonlar ve işletim sistemleri için bu adrese bakın:
dexcom.com/compatibility

Uygulamayı Ayarlama

1. Başlarken

Ayarlama sırasında güvenli internet bağlantısı gerekiyor.

- Dexcom G7 uygulamasını indirmek için Apple Uygulama Mağazasına veya Google Play Mağazasına gidin




Dexcom G7

★★★★☆ 4.3 K

- Uygulamayı açın
- Oturum açın veya bir hesap oluşturun

3. Sensör Isınma Süresi

Sensör ısınma süresi, ölçüm değerlerini ve uyarıları ne zaman almaya başlayacağınızı gösterir.

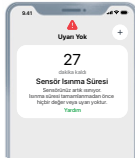

2. Kurulum

- Uygulamayı kurmak için uygulama talimatlarına uyun
- Sensörü yerleştirme talimatları için, uygulama talimatlarına uyun veya sensör kutusundaki *Sensörü Yerleştirme* talimatlarına gidin
- Yerleştirme ve eşleştirme işlemlerinden sonra, aplikatörü atma ve Dexcom paketini geri dönüşüme gönderme için bölgenizde geçerli olan talimatlara uyun

4. Sensör Oturumunuz

Daha fazla bilgi edinmek için *G7 Kullanıcı Kılavuzuna* gidin.

Alıcıyı Ayarlama

1. Başlarken

Alıcıyı açmak için **Seç** düğmesine 3–5 saniye basılı tutun



3. Sensör Isınma Süresi

Sensör ısınma süresi, ölçüm değerlerini ve uyarıları ne zaman almaya başlayacağınızı gösterir.



2. Kurulum

- Alıcıyı ayarlamak için, alıcı ekranlarındaki talimatlara uyun
- Sensörü yerleştirme talimatları için, sensör kutusundaki *Sensörü Yerleştirme* talimatlarına gidin
- Yerleştirme ve eşleştirme işlemlerinden sonra, aplikatörü atma ve Dexcom paketini geri dönüşüme gönderme için bölgenizde geçerli olan talimatlara uyun

4. Sensör Oturumunuz

Daha fazla bilgi edinmek için *G7 Kullanıcı Kılavuzuna* gidin.

Alıcı Navigasyonu

Alıcı ekranı, hangi düğmeleri kullanmanız gerektiğini belirtir.

- Daha hızlı kaydırmak için, **Kaydır** düğmesine basılı tutun
- Bir sonraki alana geçmek için **Seç** düğmesini kullanın





© 2023 Dexcom, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

dexcom.com/patents patentleri kapsamındadır.

Dexcom, Dexcom, Inc.nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli bir markasıdır. *Bluetooth*, Bluetooth SIG'e ait tescilli bir ticari markadır. Apple, Apple Inc.nin ABD ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markasıdır. Android, Google LLC'nin bir ticari markasıdır. Diğer tüm markaların mülkiyetleri kendi sahiplerine aittir.

dexcomG7



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
+1-858-200-0200
dexcom.com

ABD'nin dışında: Bölgenizdeki Dexcom
temsilciniz ile iletişime geçin

AW-00047-94 Rev 001 MT-00047-94
Rev Date 2023/12



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany